



Sicherheit in ihrer schönsten Form

Hard Top Box

Hart im Nehmen Smart im Handling Die Hard Top Box

Der fortschrittliche Sterilcontainer von Innovations Medical

Unschlagbar seine Konstruktion Mühelos die Handhabung
Sicherheit und Qualität bei der Sterilisation Ihr Nutzen

Eine nachhaltige, verantwortungsbewusste und wertbeständige Investition.

Unabhängige Untersuchungen bestätigen die Funktions-, Sicherheits- und Qualitätsvorteile der Hard Top Box. Im Trockenzyklus ist die Aluminiumlegierung jeder Kunststoff-Lösung überlegen.

Der Sterilcontainer von Innovations Medical toppt alle relevanten Standards und erfüllt die höchsten Anforderungen des Health Care Marktes.




Perfektion im Detail

Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in jedem Detail der Hard Top Box - von der Konstruktion bis hin zur übersichtlichen Kennzeichnung des Inhalts sowie den Schutzmechanismen zur Gewährleistung der Sicherheit.

ökonomisch nachhaltige, wertbeständige Investition

- verschiedene Größen für den individuellen Bedarf
- extrem stabile Deckel und Wannen
- dauerhaft wartungs- und verschleißfrei
- kein Verbrauchsmaterial (pasteursche Schleife) notwendig
- Deckeldichtungen werden sicher in einer Form-Nut gehalten, ein einfacher und schneller Austausch ohne Kleber

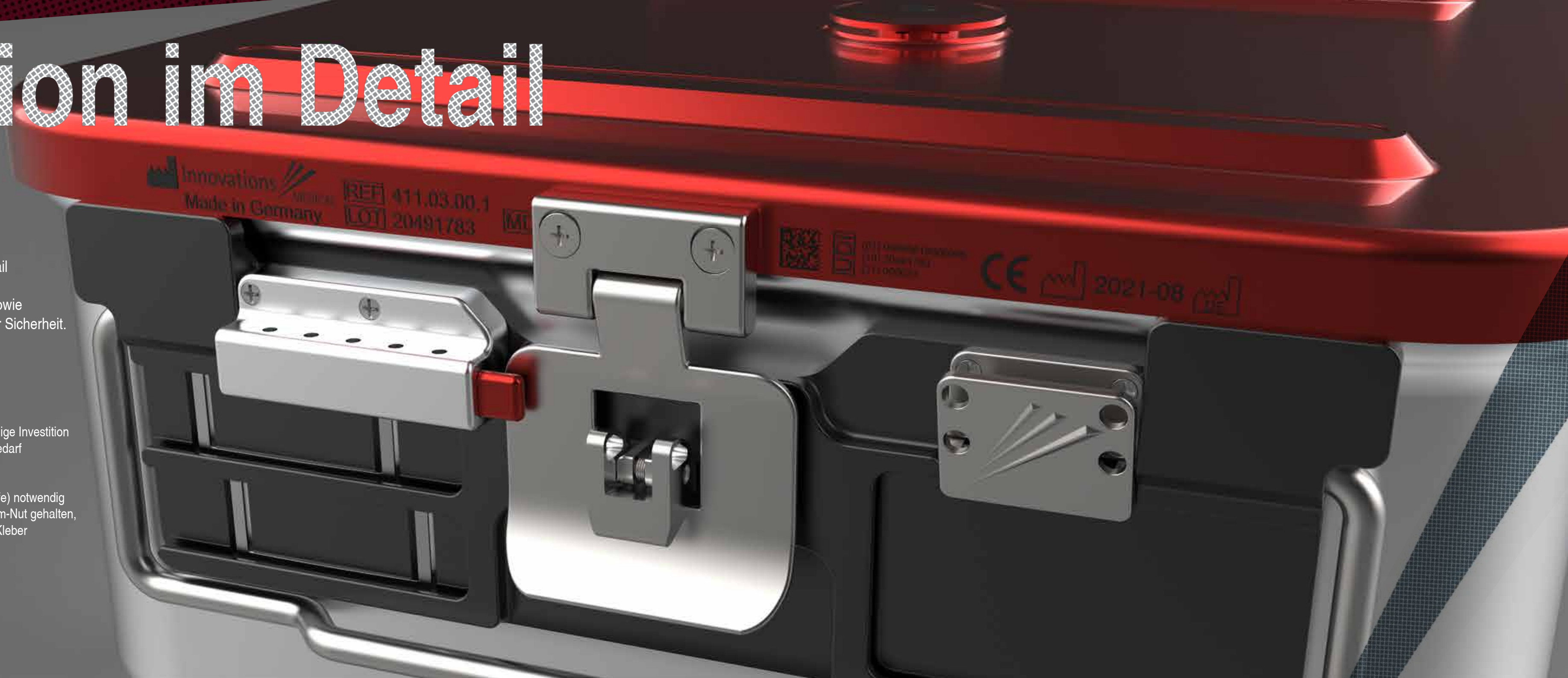

Vollendete Sicherheit

Der Deckel

Der erste seiner Art !


Präzise gefräst aus einem massiven Aluminiumblock.

Ein hohes Maß an Form und Stabilität - geschaffen für den harten Alltag.

ergonomisch einfaches Handling | exaktes stapeln | schneller, sicherer Einsatz | glatte Konturen mit fließenden Übergängen

reduziert auf wenige Anbauteile | den Prüfaufwand | die Trocknungszeit im Sterilisator | den Aufwand zum Wechsel der Dichtung | die Wartungskosten

Die Wanne

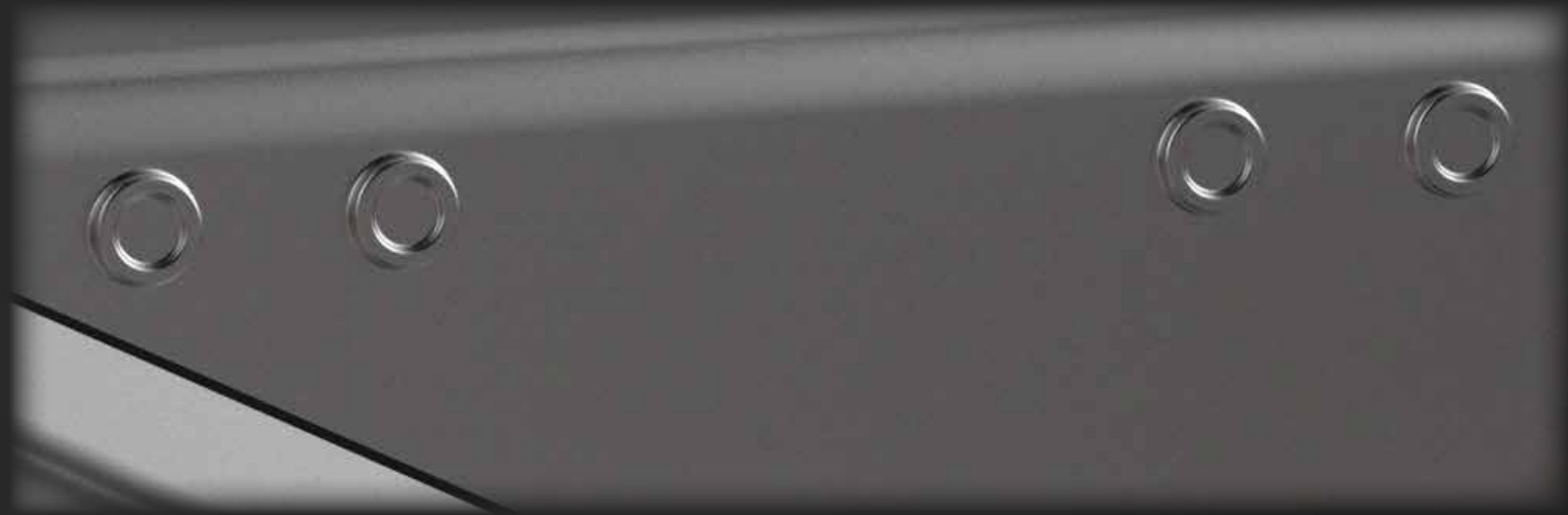

Containerwanne

- mit hoch belastbarem Tragegriff
- formschlüssige Verbindung des Identbeschlages mit der Wanne ohne Niet oder Verschraubung (innovative TOX-Clinchverbindungen machen die Dichtigkeitsprüfung der Wanne überflüssig)
- mit Abstützung bei Stapelung der Sterilcontainer
- der Innenraum bietet ausreichend Platz für alle gängigen Siebgrößen
- die Dicke des Wannenmaterials ist optimal auf die Trocknung und das Handling ausgelegt
- keine Adhäsionskräfte durch zu große Dichtflächen zwischen Deckel und Wanne



EasyStop

Sicherheit durch Innovation

EasyStop

Das System EasyStop ohne VerbrauchsfILTER.

Mit dem EasyStop-System antwortet Innovations Medical auf gewachsene Anforderungen an Sterilität, Umweltschutz und Komfort beim Handling.

EasyStop stoppt Microorganismen noch wirksamer als herkömmliche Einmalfilter und lässt sich beliebig oft anwenden. Der dabei erzielte Abscheidungsgrad liegt bei 99,997%. Zum Öffnen bzw. Schließen genügt ein Griff: Filterabdeckung eindrücken, drehen – fertig.

Genial einfach, einfach genial



Das Ringrippen-Labyrinth stoppt die Microben, Keime und Partikel im Belüftungsstrom. Das Sterilgut bleibt dauerhaft geschützt und sorgt für eine maximale Patientensicherheit.

Permanentfilter



- Passend für Sterilcontainer mit Filterhalter für Permanentfilter
- Der Permanentfilter bleibt über die gesamte Zykluszeit in der Filterhalterung
- Filterwechsel bei der Aufbereitung entfällt bis zum Erreichen der Zykluszeit (1200 Zyklen)
- Äußerst widerstandsfähig, langlebig und chemikalienbeständig

Einwegfilter

- Passend für Sterilcontainer mit Filterhalter für Einwegpapierfilter
- Der Einwegpapierfilter wird bei jedem Sterilisationszyklus gewechselt.
- Die klassische Filtertechnologie





versiegelt klassisch mit Plombe oder automatisch während der Sterilisation über einen optionalen Thermolock



Filteranzeige visuelle Erkennung der eingesetzten Filterscheiben


sicher vollendete, normgerechte Sterilisation | unbestechliche Kontrolle durch Plombe | eindeutige Codierung durch Farblabels | voll einsehbarer, großer Identbeschlag für Kennung und Protokolletikette | glatte Oberflächen vermeiden die Verletzungsgefahr

Farben

A 3D rendering of a clipboard with a red and blue cover, a yellow clip, and a green sheet of paper. The word 'Farben' is written in a white, textured font on the red part of the cover.

Identischilder

A collection of small, rectangular color swatches in various colors (red, blue, green, yellow, black, white) scattered on a dark surface.

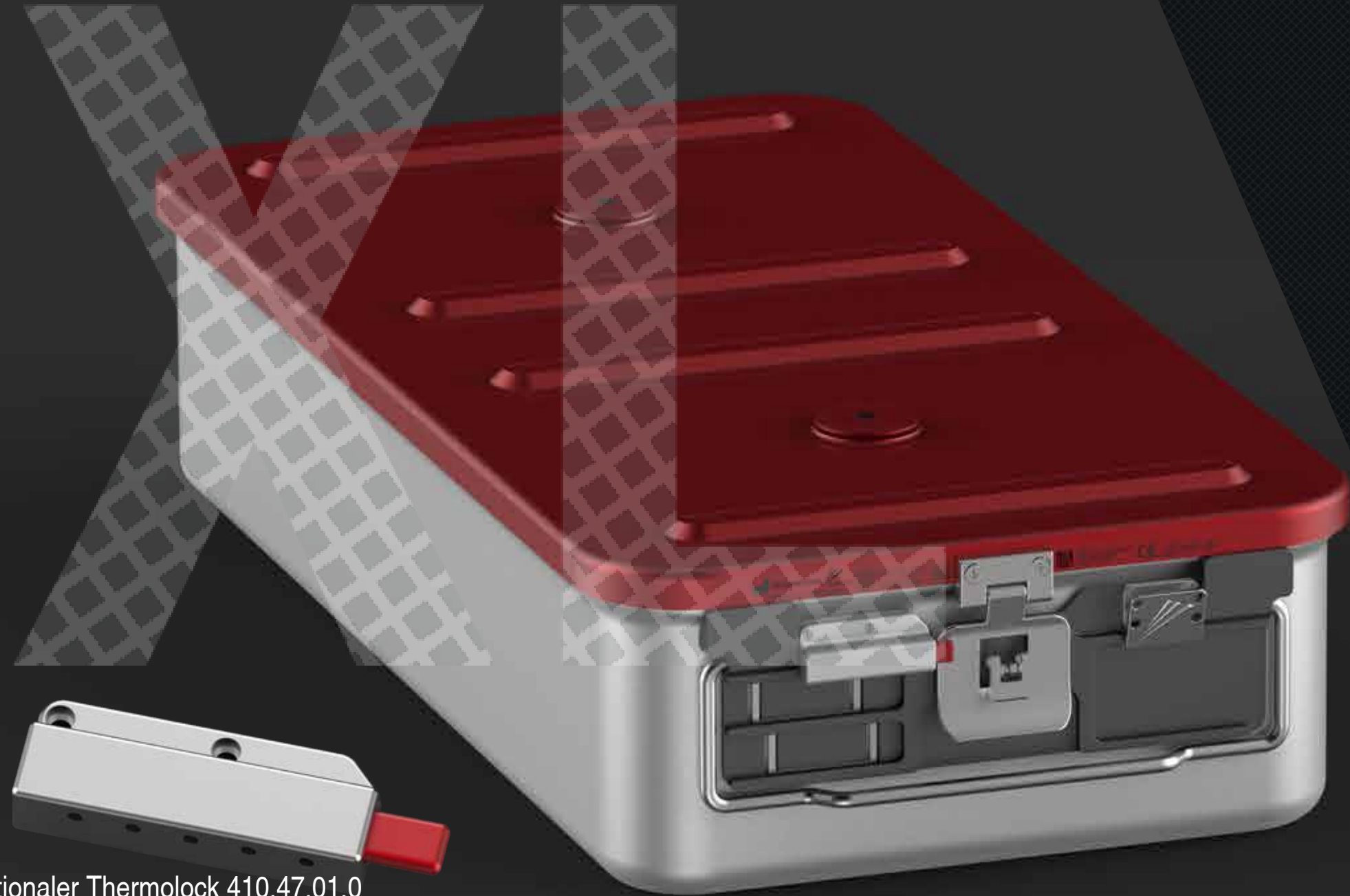

Optionaler Thermolock 410.47.01.0

Deckel XL

EasyStop

411.03.01.X

Permanentfilter

413.03.01.X

Papierfilter

412.03.01.X

Entsorgungsdeckel

417.04.01.X

rot 1

silber 2

blau 3

grün 4

gold 5

schwarz 6

grau 7

Wanne

Größe

Außenabmessung

Innenabmessung
[max. Beladehöhe]

Artikelnummer

XL 100

590 x 290 x 100

533 x 269 x [73]

410.05.10.2.XX.00

XL 135

590 x 290 x 135

533 x 269 x [108]

410.05.13.2.XX.00

XL 150

590 x 290 x 150

533 x 269 x [123]

410.05.15.2.XX.00

XL 170

590 x 290 x 170

533 x 269 x [143]

410.05.17.2.XX.00

XL 220

590 x 290 x 220

533 x 269 x [193]

410.05.22.2.XX.00

XL 270

590 x 290 x 270

533 x 269 x [243]


410.05.27.2.XX.00



ohne Thermolock 06



ohne Thermolock 10

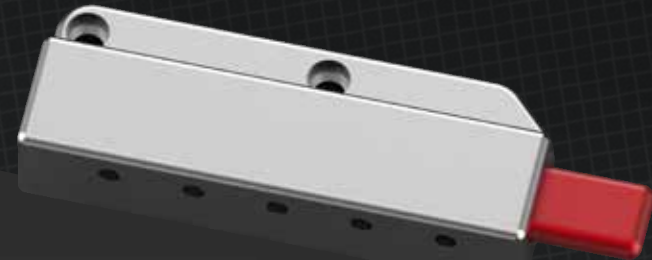

Optionaler Thermolock 410.47.01.0




Deckel L

EasyStop 421.03.01.X	Permanentfilter 423.03.01.X	Papierfilter 422.03.01.X	Entsorgungsdeckel 427.04.01.X
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne


Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
L 100	460 x 290 x 100	422 x 269 x [73]	420.05.10.2.XX.00
L 135	460 x 290 x 135	422 x 269 x [108]	420.05.13.2.XX.00
L 150	460 x 290 x 150	422 x 269 x [123]	420.05.15.2.XX.00

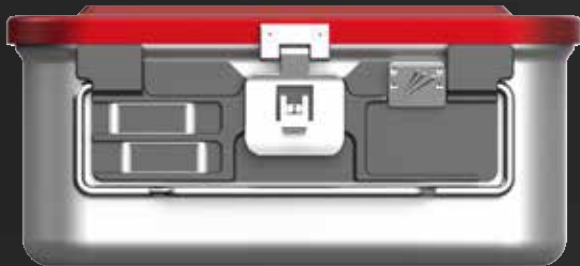

ohne Termolock 06



ohne Termolock 10

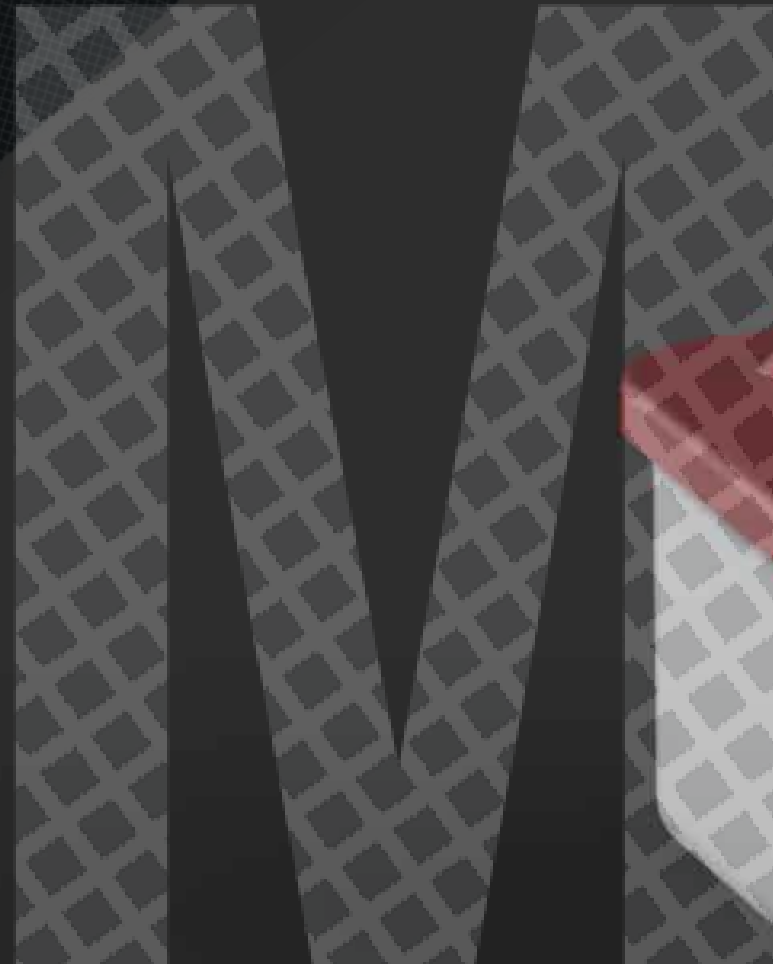

Optionaler Thermolock 410.47.01.0

Deckel M

EasyStop 431.03.01.X	Permanentfilter 433.03.01.X	Papierfilter 432.03.01.X	Entsorgungsdeckel 437.04.01.X
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
M 100	290 x 290 x 100	253 x 269 x [73]	430.05.10.2.XX.00
M 135	290 x 290 x 135	253 x 269 x [108]	430.05.13.2.XX.00
M 150	290 x 290 x 150	253 x 269 x [123]	430.05.15.2.XX.00
M 170	290 x 290 x 170	253 x 269 x [143]	430.05.17.2.XX.00
M 220	290 x 290 x 220	253 x 269 x [193]	430.05.22.2.XX.00
M 270	290 x 290 x 270	253 x 269 x [243]	430.05.27.2.XX.00




ohne Thermolock 06



ohne Thermolock 10


Identbeschläge

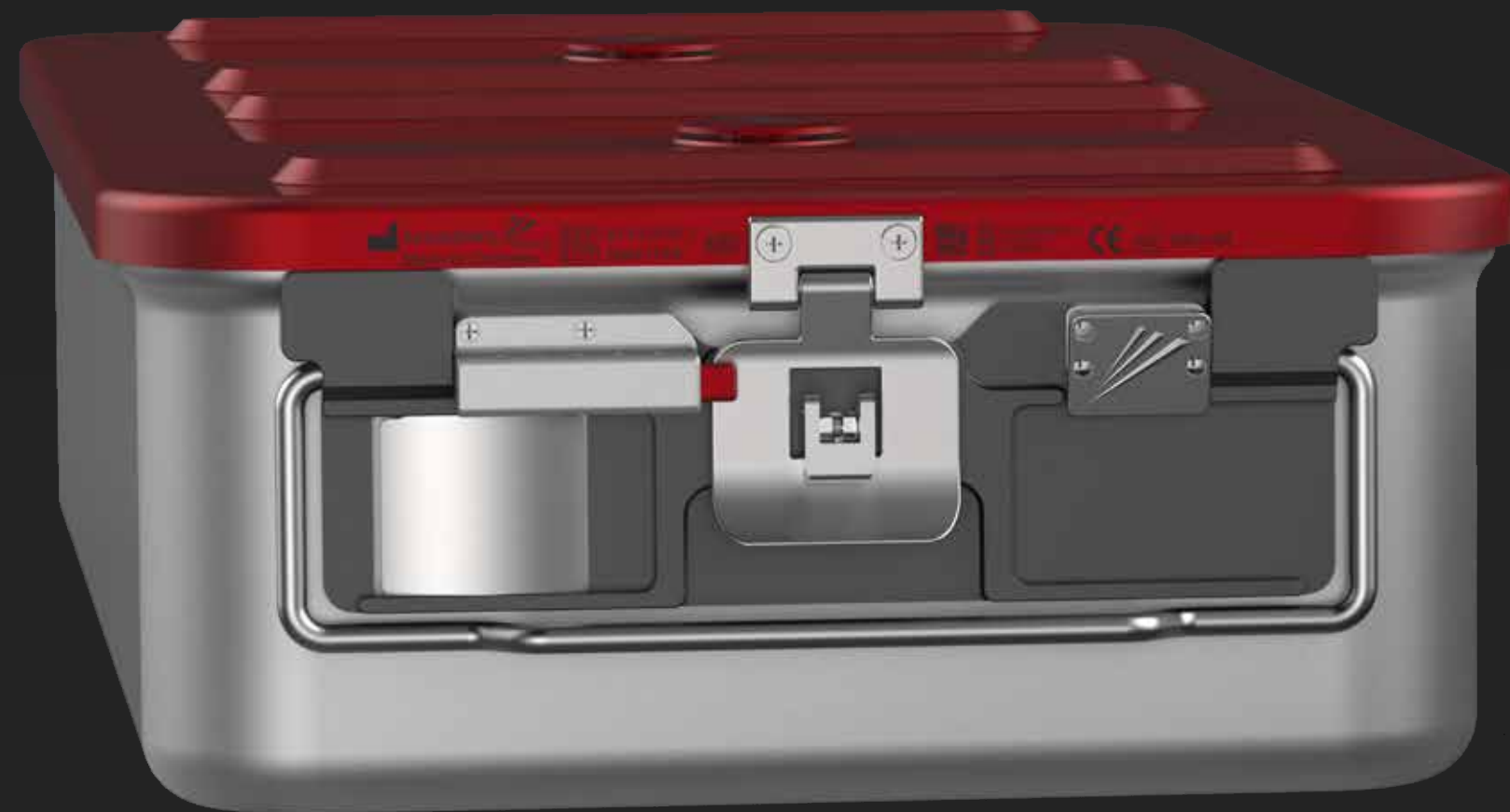


ohne Thermolock 10



notwendig

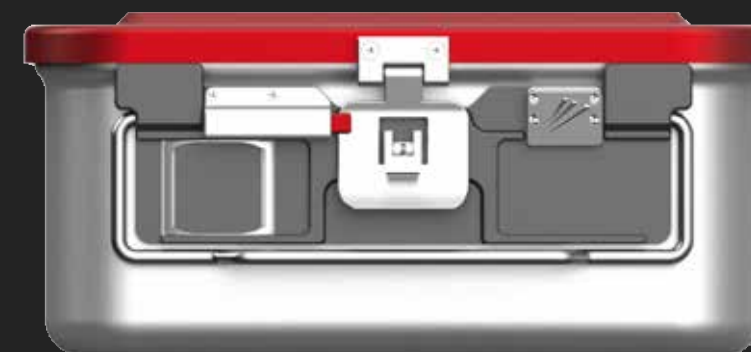

Optionaler Thermolock 410.47.01.0

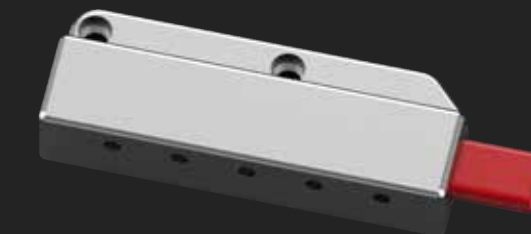

nicht notwendig aber kompatibel


Identbeschläge




ohne Thermolock 06




notwendig

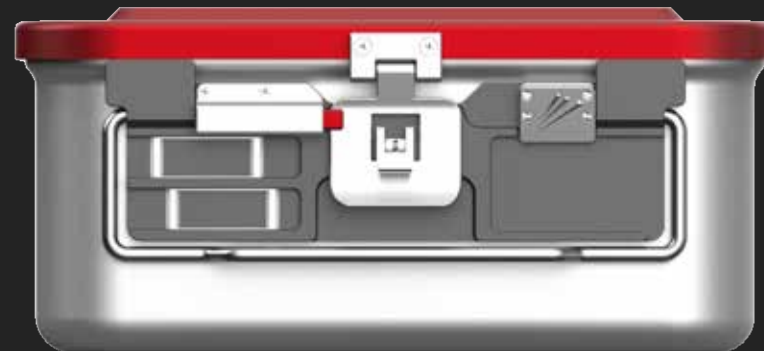


Optionaler Thermolock 410.47.01.0

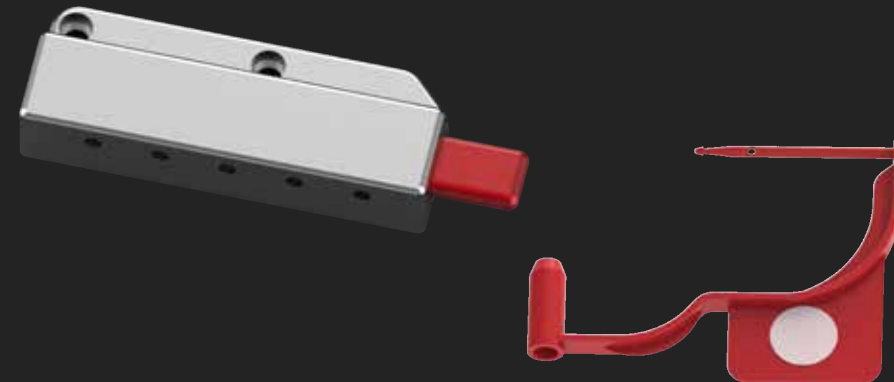

nicht notwendig aber kompatibel

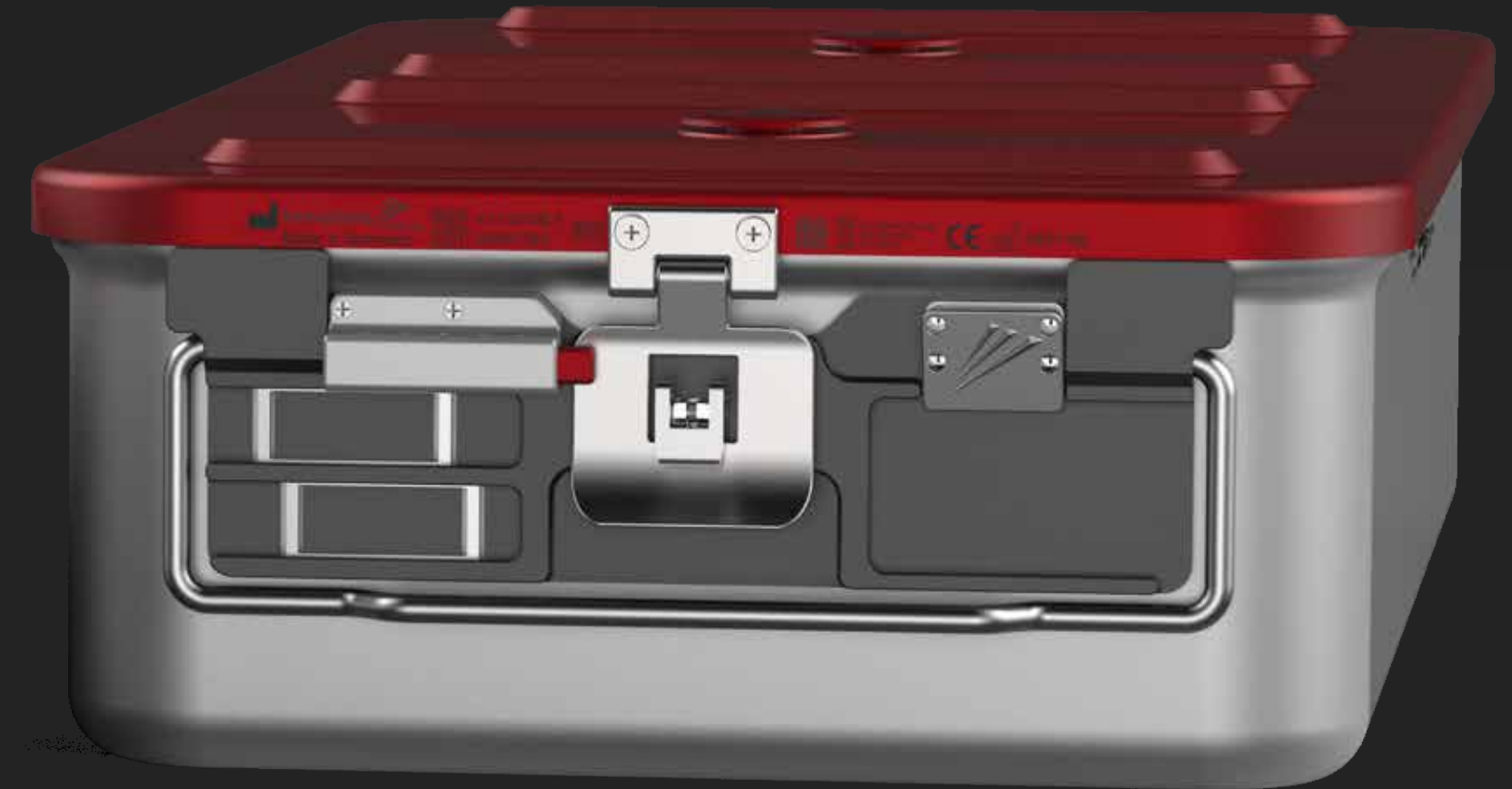

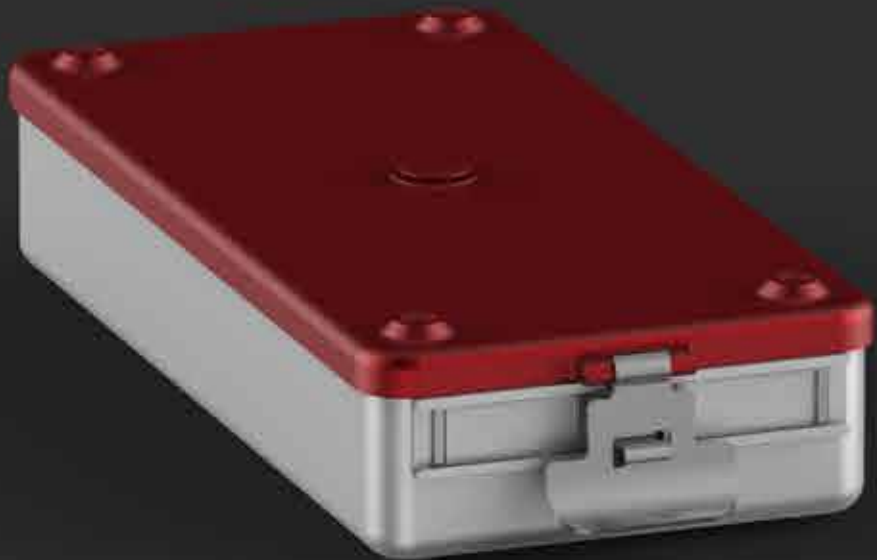

Deckel S


EasyStop
471.03.01.X

Entsorgungsdeckel
477.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe		Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
S	47	300 x 135 x 47	279 x 129 x [31]	470.05.04.2
S	62	300 x 135 x 62	279 x 129 x [46]	470.05.06.2
S	71	300 x 135 x 71	279 x 129 x [55]	470.05.07.2

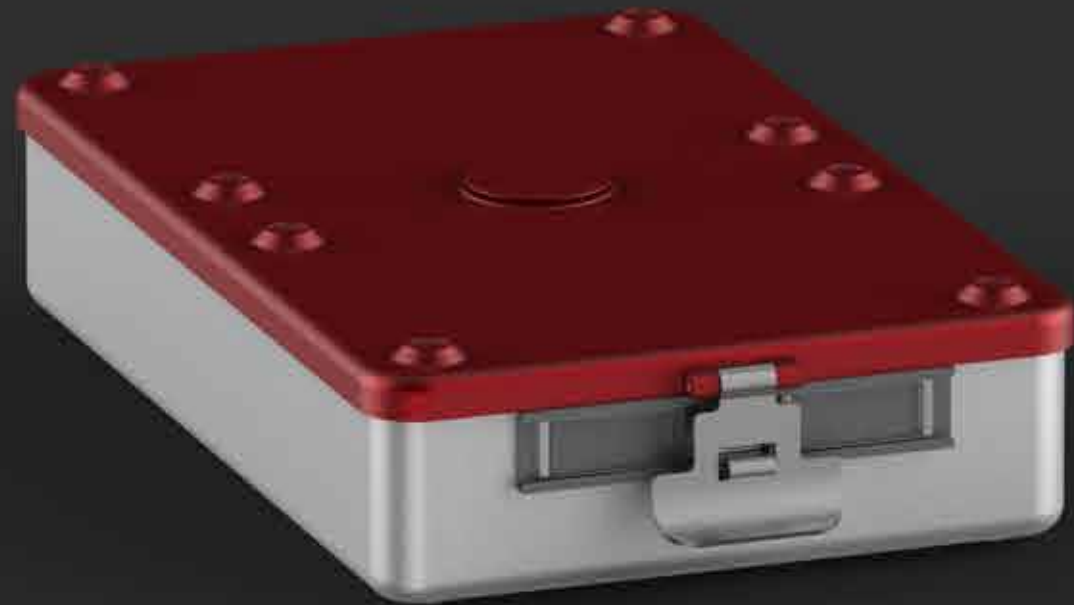

Deckel D

EasyStop
481.03.01.X

Entsorgungsdeckel
487.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe		Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
D	50	310 x 190 x 50	282 x 181 x [34]	480.05.04.2
D	67	310 x 190 x 67	282 x 181 x [51]	480.05.06.2
D	85	310 x 190 x 85	282 x 181 x [69]	480.05.08.2



Deckel D1/2

EasyStop
491.03.01.X


Entsorgungsdeckel
497.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7


Wanne

Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
D1/2 50	205 x 145 x 50	181 x 136 x [34]	490.05.04.2
D1/2 67	205 x 145 x 67	181 x 136 x [51]	490.05.06.2

ID Schilder 40x60
ohne Laserbeschriftung
410.23.00.X

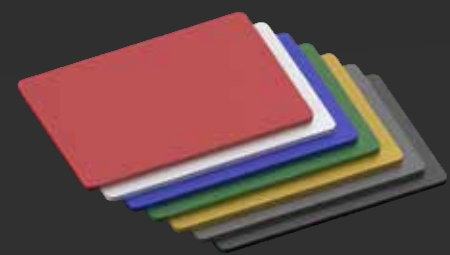

ID Schilder 18x50
ohne Laserbeschriftung
410.22.00.X

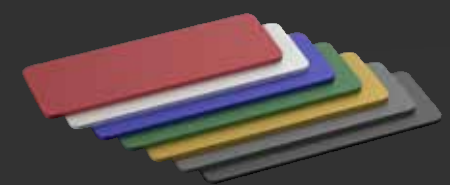

mit individueller Beschriftung
410.13.00.X



mit individueller Beschriftung
410.12.00.X



- rot 1
- silber 2
- blau 3
- grün 4
- gold 5
- schwarz 6
- grau 7

Plombe

ohne Indikator
410.21.00.1

[100pcs.]

mit Indikator [100pcs.]
410.11.00.1



Silikonmatten

Größe

XL [440x230]
410.30.00.3

L [380x230]
420.30.00.3


M [220x230]
430.30.00.3

S [270x125]
440.30.00.3

Dental [260x160]
450.30.00.3


1/2 Dental [160x130]
460.30.00.3

XL lang [540x230]
410.36.00.3

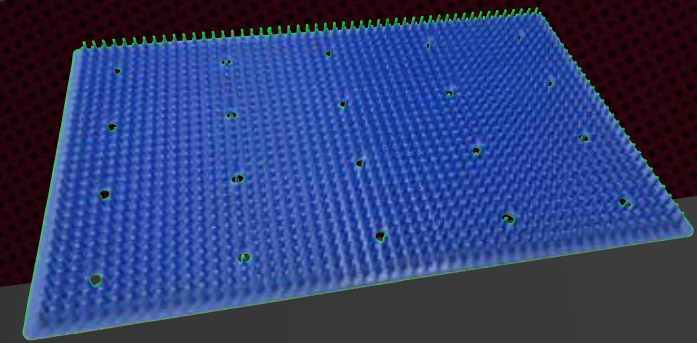

Optionaler Thermolock

410.47.01.0

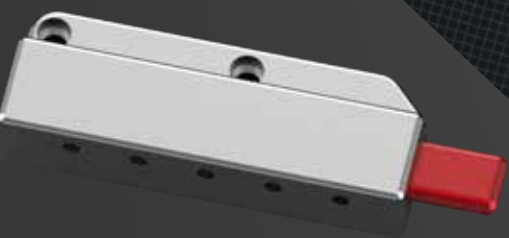



Innovations Medical Badstraße 11, 78532 Tuttlingen



nachhaltig Innovations Medical

- Klimaneutrale Pelletsheizung
- Photovoltaikanlage



Innovations Medical GmbH
Badstraße 11, 78532 Tuttlingen, Germany
Phone: +49 74 61 / 9 66 42 - 0
Fax: +49 74 61 / 9 66 42 - 82
Mail: info@innovations-medical.de
Web: www.innovations-medical.de