



la seguridad en su forma más bela

**Hard Top Box**

# manejo inteligente the Hard Top Box

el contenedor estéril avanzado de Innovations Medical

manejo sin esfuerzo por su diseño inmejorable  
su beneficio en la seguridad y calidad en la esterilización

sostenible, una inversión responsable que conserva su valor.

pruebas independientes confirman las ventajas funcionales, de seguridad y de calidad de la caja rígida con tapa dura.  
en el ciclo de secado, la aleación de aluminio es superior a cualquier solución plástica.

El contenedor estéril de Innovations Medical supera todos los estándares relevantes y cumple con los más altos requisitos del mercado sanitario.






# perfección en el detalle

nuestros estándares de calidad se reflejan en cada detalle de la caja rígida com tapa dura: desde el diseño hasta el etiquetado claro del contenido y el mecanismo de protección para garantizar la seguridad.

## inversión sostenible económicamente que conserva su valor

- diferentes tamaños para necesidades individuales
- tapas y cubetas extremadamente estables
- no se necesitan consumibles (laberinto pasteur)
- la junta de la tapa se sujeta de forma segura en una ranura circunferencial mecanizada, lo que garantiza un sellado perfecto sin pegante.

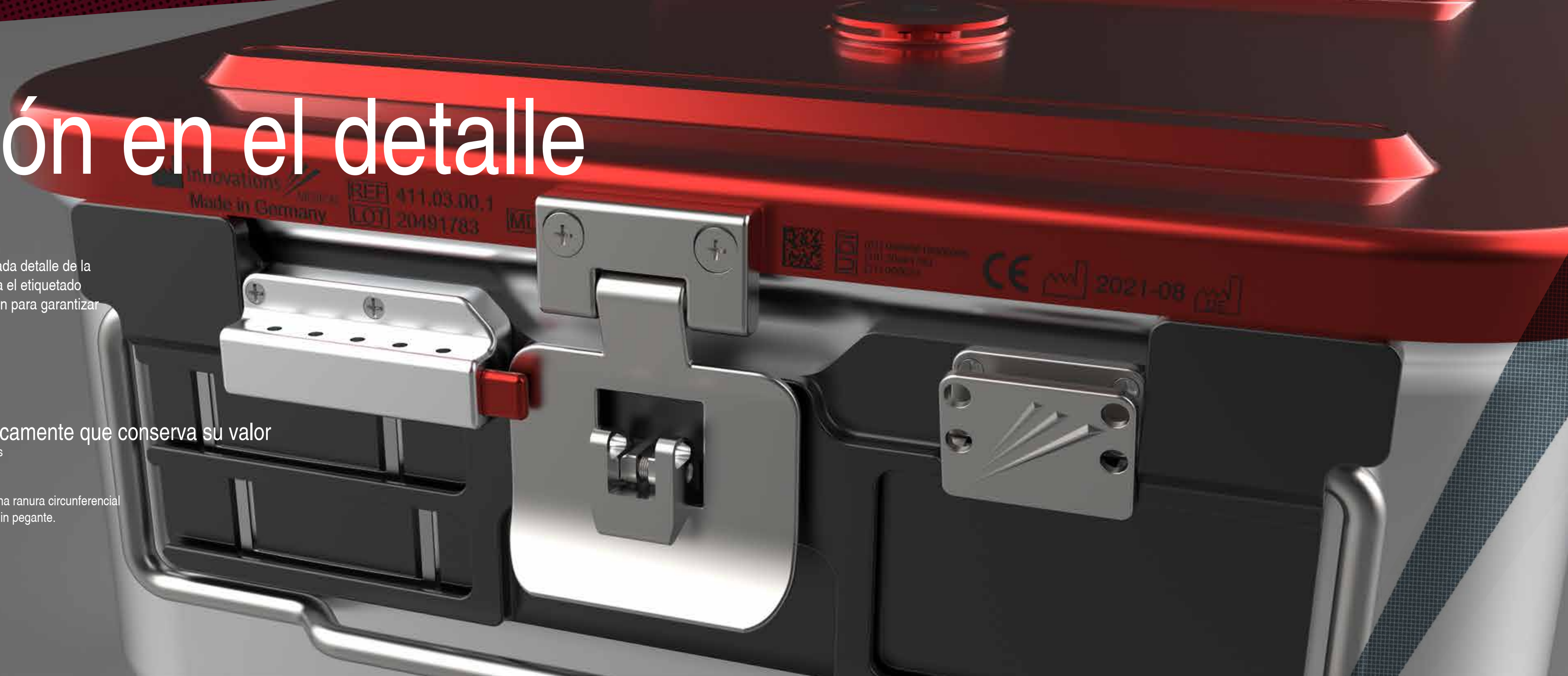

# seguridad completa la tapa

## ¡El primero de su tipo!


fresado con precisión a partir de un bloque sólido de aluminio.  
un alto grado de forma y estabilidad: creado para la dura vida cotidiana.

**sencillo** manejo ergonómico | apilado preciso | uso rápido y seguro | contornos suaves y sin grietas para una limpieza fácil

**reducido** a unos pocos accesorios | los esfuerzos de prueba | el tiempo de secado en el esterilizador | el esfuerzo necesario para cambiar el sello | los costos de mantenimiento



# la cubeta

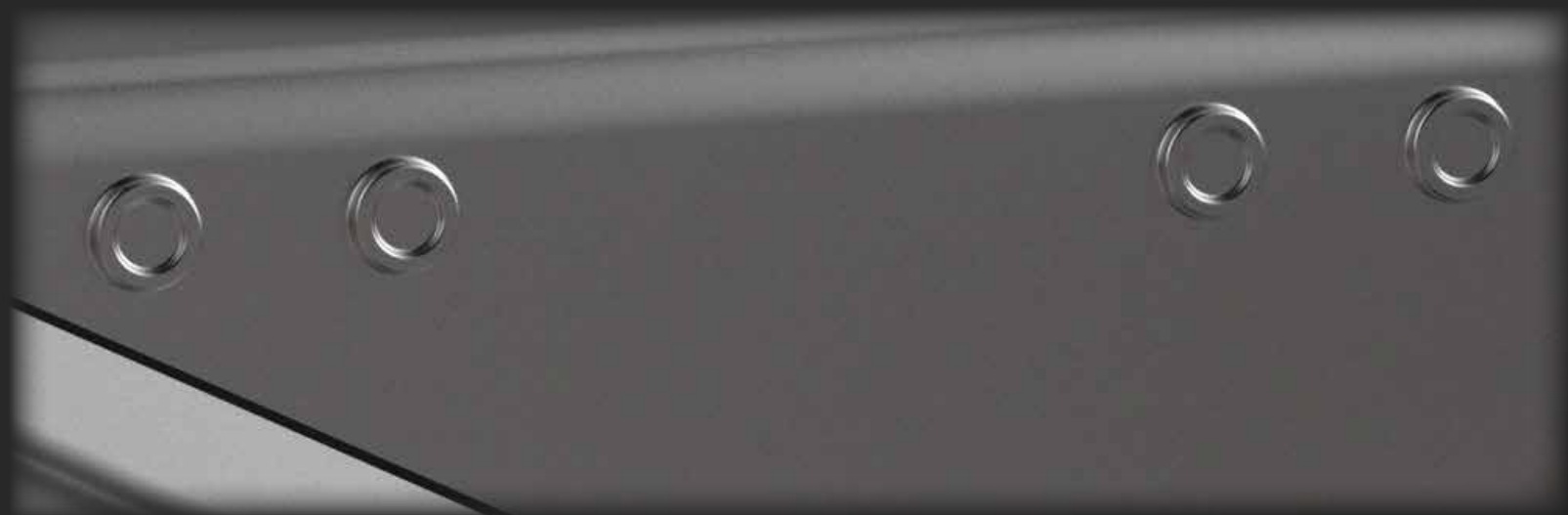

## recipiente de la cubeta

- con ala de transporte resistente
- positiva conexión de los accesorios con la cubeta sin remaches ni tornillos (las innovadoras conexiones TOX-remache hacen innecesaria la prueba de fugas de la bandeja).
- con apoyo al apilar los contenedores estériles
- el interior ofrece suficiente espacio para todos los tamaños de cestas habituales.
- el grosor del material de la cubeta está diseñado de manera óptima para el secado y la manipulación.
- sin fuerzas de adhesión debido a superficies de sellado demasiado grandes entre la tapa y el recipiente



# EasyStop

# ingeniosamente simple, simplemente ingeniosa

## seguridad a través de la innovación

el sistema EasyStop sin filtro consumible

con el sistema EasyStop, Innovations Medical responde a las crecientes demandas de esterilidad, protección del medio ambiente y facilidad de manejo.

EasyStop detiene los microorganismos con mayor eficacia que los filtros desechables convencionales y puede utilizarse con la frecuencia necesaria.

la eficiencia de filtración alcanzada es del 99,997%.

para abrir o cerrar el filtro basta con un solo manejo: presione la tapa del filtro, gírela y listo.



el laberinto de nervaduras anulares detiene la entrada de microbios, gérmenes y partículas en el flujo de aireación.  
el material estéril permanece protegido de forma permanente y garantiza la máxima seguridad del paciente.



# filtro permanente

- adecuado para recipientes estériles con portafiltros para filtro permanente
- el filtro permanente permanece en el portafiltros durante todo el tiempo del ciclo
- no es necesario cambiar los filtros durante el reprocesamiento hasta que se alcanza el tiempo del ciclo (1200 ciclos)
- extremadamente duradero, de larga vida útil y resistente a los productos químicos




# filtro desechable

- adecuado para recipientes estériles con portafiltros para filtros de papel desechables
- el filtro de papel desechable se cambia a cada ciclo de esterilización.
- la tecnología de filtrado clásico





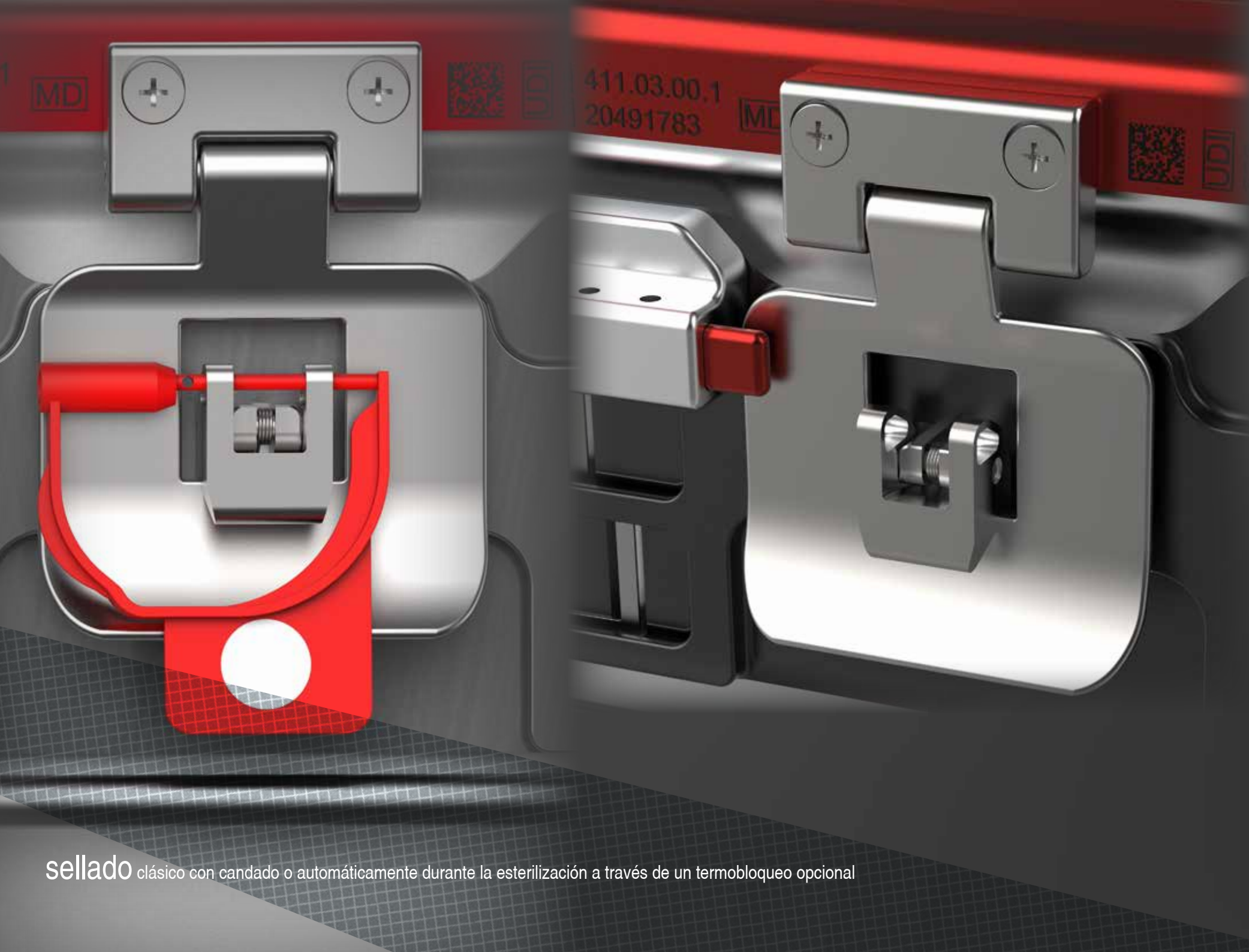

**sellado** clásico con candado o automáticamente durante la esterilización a través de un termobloqueo opcional




reconocimiento visual de los discos de filtro insertados mediante mostrador


**esterilización segura** y conforme a las normas | Sistema de seguridad | Codificación única mediante etiquetas de color | Etiqueta de identificación grande y totalmente visible para identificación y protocolo | Superficies lisas que evitan el riesgo de lesiones



colores

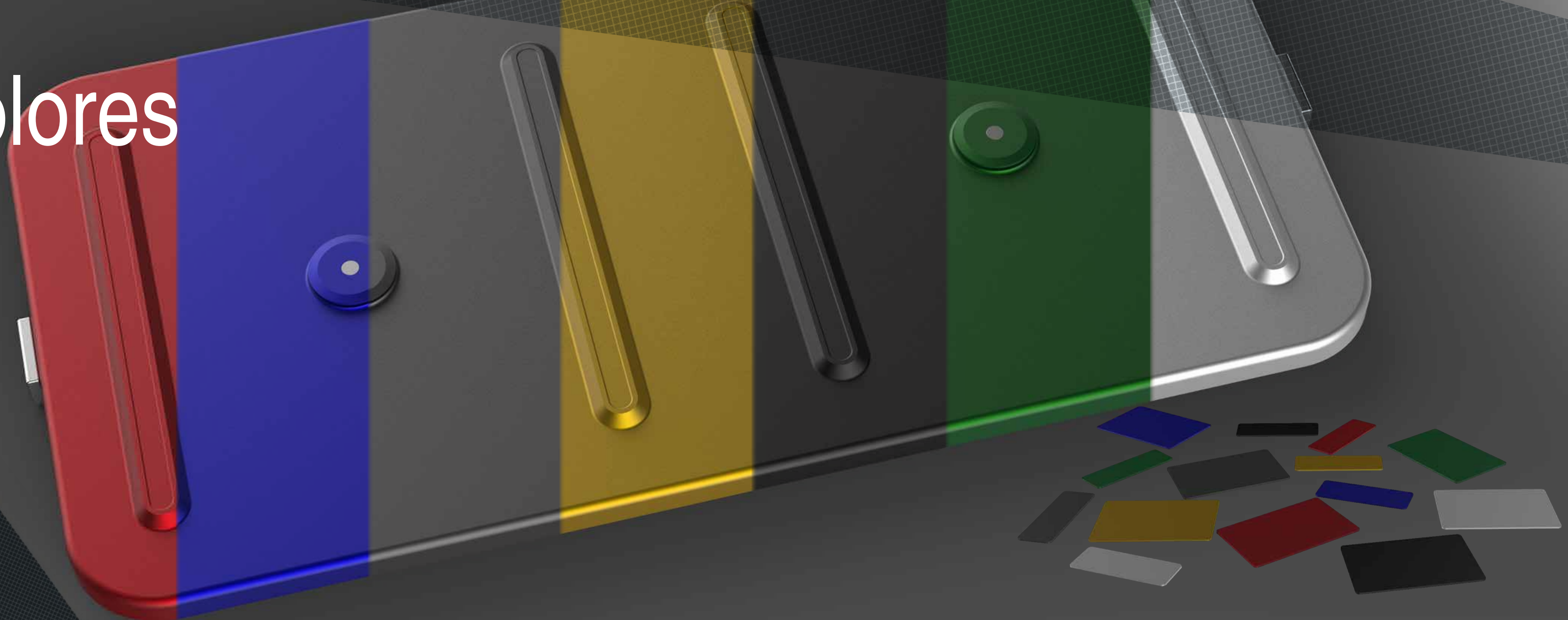



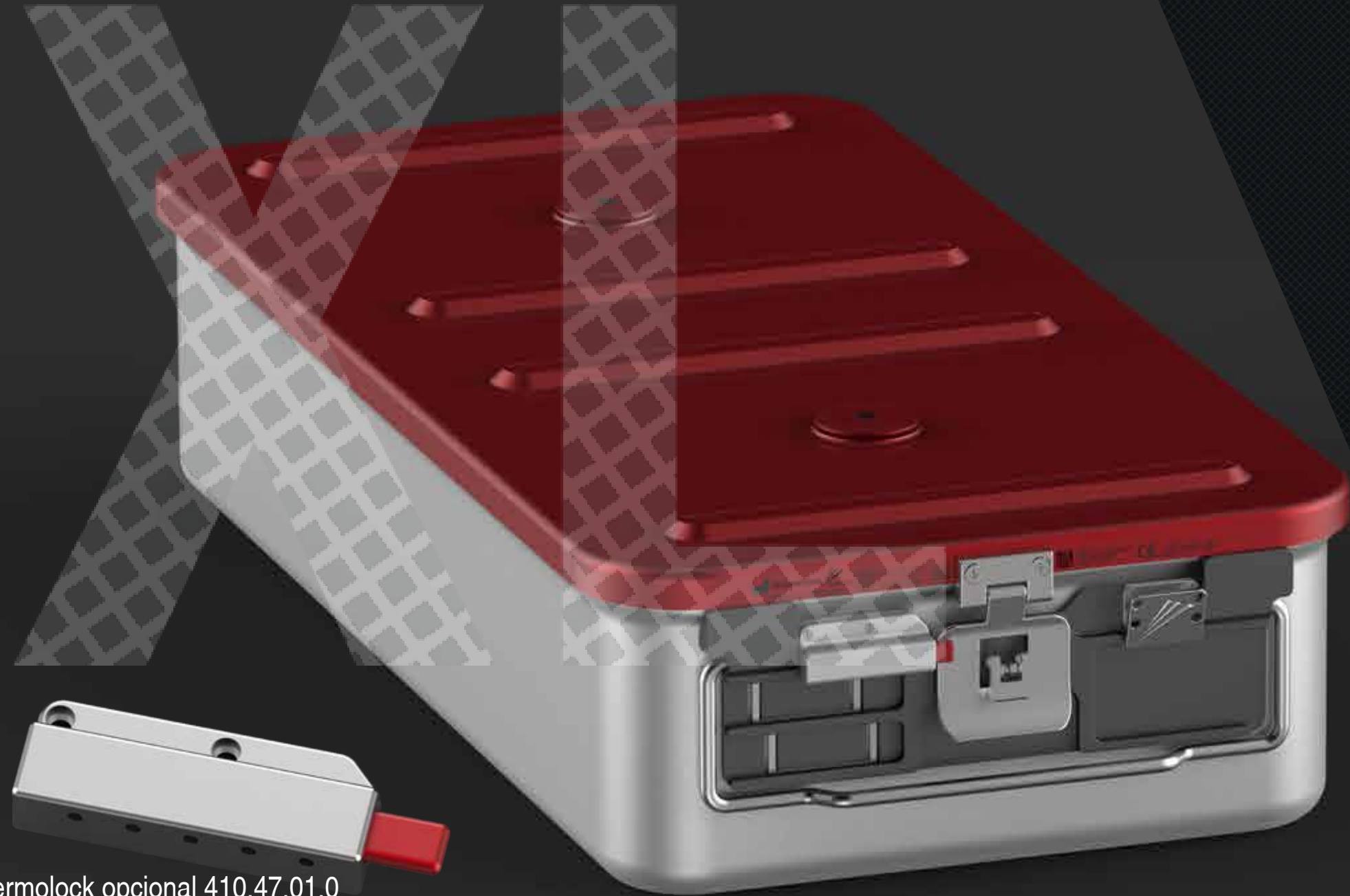

Thermolock opcional 410.47.01.0

## Tapa XL

EasyStop	filtro permanente PTFE	filtro de papel	tapa para retiro de la mesa quirúrgica
411.03.01.X	413.03.01.X	412.03.01.X	417.04.01.X

roja 1    plata 2    azul 3    verde 4    dorado5    negro6    gris 7

## Cubeta

tamaño		dimensiones externas	dimensiones internas [carga máxima alta]	número de artículo
XL	100	590 x 290 x 100	533 x 269 x [73]	410.05.10.2.XX.00
XL	135	590 x 290 x 135	533 x 269 x [108]	410.05.13.2.XX.00
XL	150	590 x 290 x 150	533 x 269 x [123]	410.05.15.2.XX.00
XL	170	590 x 290 x 170	533 x 269 x [143]	410.05.17.2.XX.00
XL	220	590 x 290 x 220	533 x 269 x [193]	410.05.22.2.XX.00
XL	270	590 x 290 x 270	533 x 269 x [243]	410.05.27.2.XX.00



sin Thermolock 06



sin Thermolock 10



Thermolock opcional 410.47.01.0



Tapa L

EasyStop	filtro permanente PTFE	filtro de papel	tapa para retiro de la mesa quirúrgica
421.03.01.X	423.03.01.X	422.03.01.X	427.04.01.X

roja 1    plata 2    azul 3    verde 4    dorado5    negro6    gris 7

Cubeta

tamaño	dimensiones externas	dimensiones internas [carga máxima alta]	número de artículo
L 100	460 x 290 x 100	422 x 269 x [73]	420.05.10.2.XX.00
L 135	460 x 290 x 135	422 x 269 x [108]	420.05.13.2.XX.00
L 150	460 x 290 x 150	422 x 269 x [123]	420.05.15.2.XX.00





sin Termolock 06



sin Termolock 10



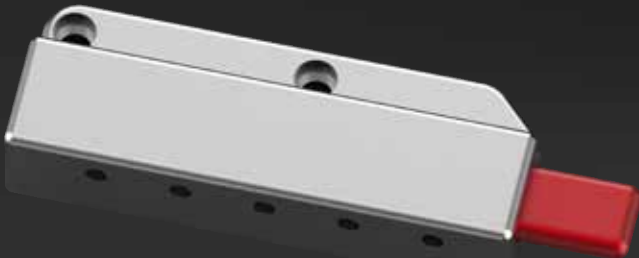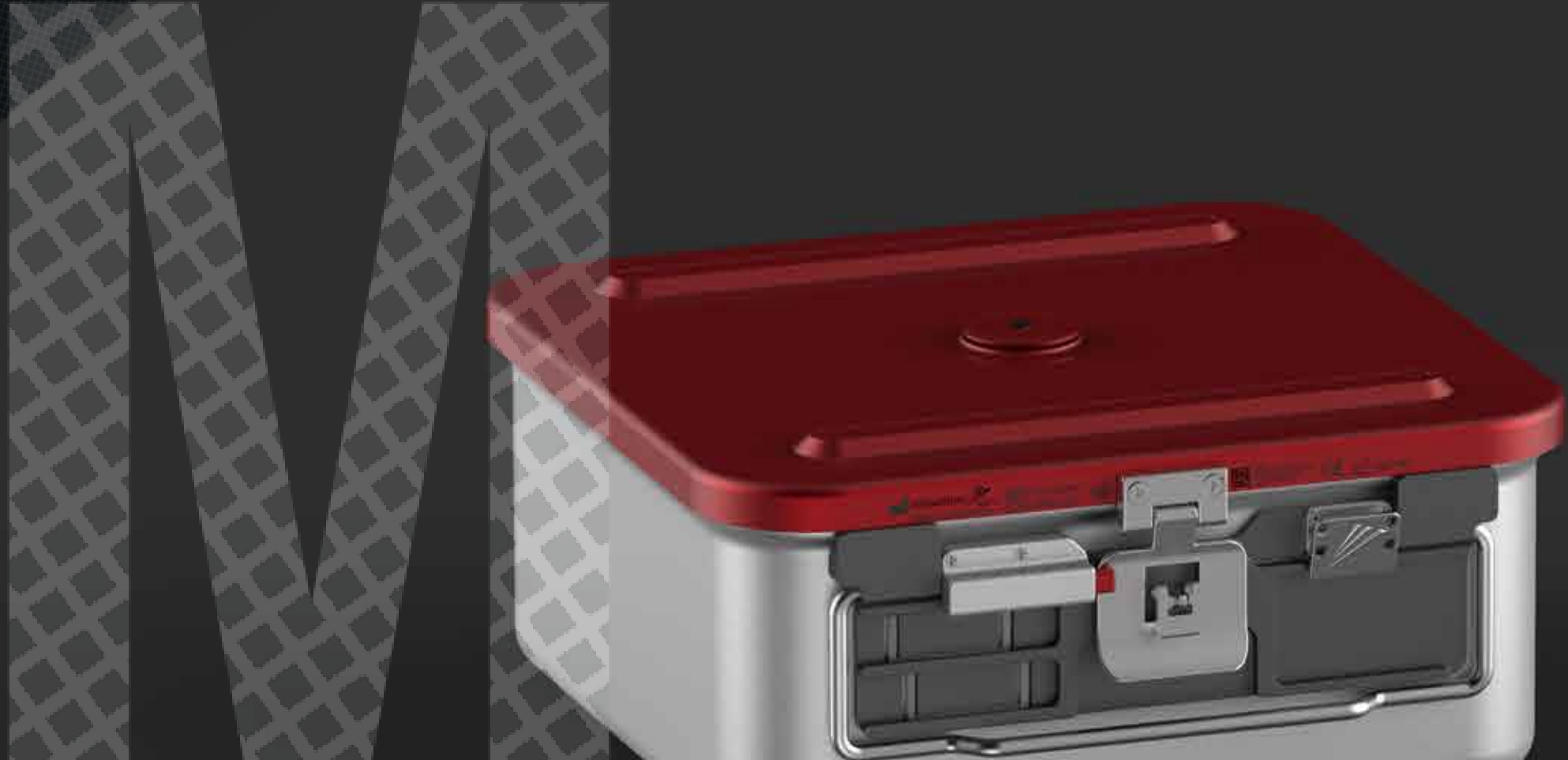

Thermolock opcional 410.47.01.0

Tapa M

EasyStop	filtro permanente PTFE	filtro de papel	tapa para retiro de la mesa quirúrgica
431.03.01.X	433.03.01.X	432.03.01.X	437.04.01.X

roja 1    plata 2    azul 3    verde 4    dorado5    negro6    gris 7

Cubeta

tamaño		dimensiones externas	dimensiones internas [carga máxima alta]	número de artículo
M	100	290 x 290 x 100	253 x 269 x [73]	430.05.10.2.XX.00
M	135	290 x 290 x 135	253 x 269 x [108]	430.05.13.2.XX.00
M	150	290 x 290 x 150	253 x 269 x [123]	430.05.15.2.XX.00
M	170	290 x 290 x 170	253 x 269 x [143]	430.05.17.2.XX.00
M	220	290 x 290 x 220	253 x 269 x [193]	430.05.22.2.XX.00
M	270	290 x 290 x 270	253 x 269 x [243]	430.05.27.2.XX.00




sin Termolock 06



sin Termolock 10


# accesorios de identificación

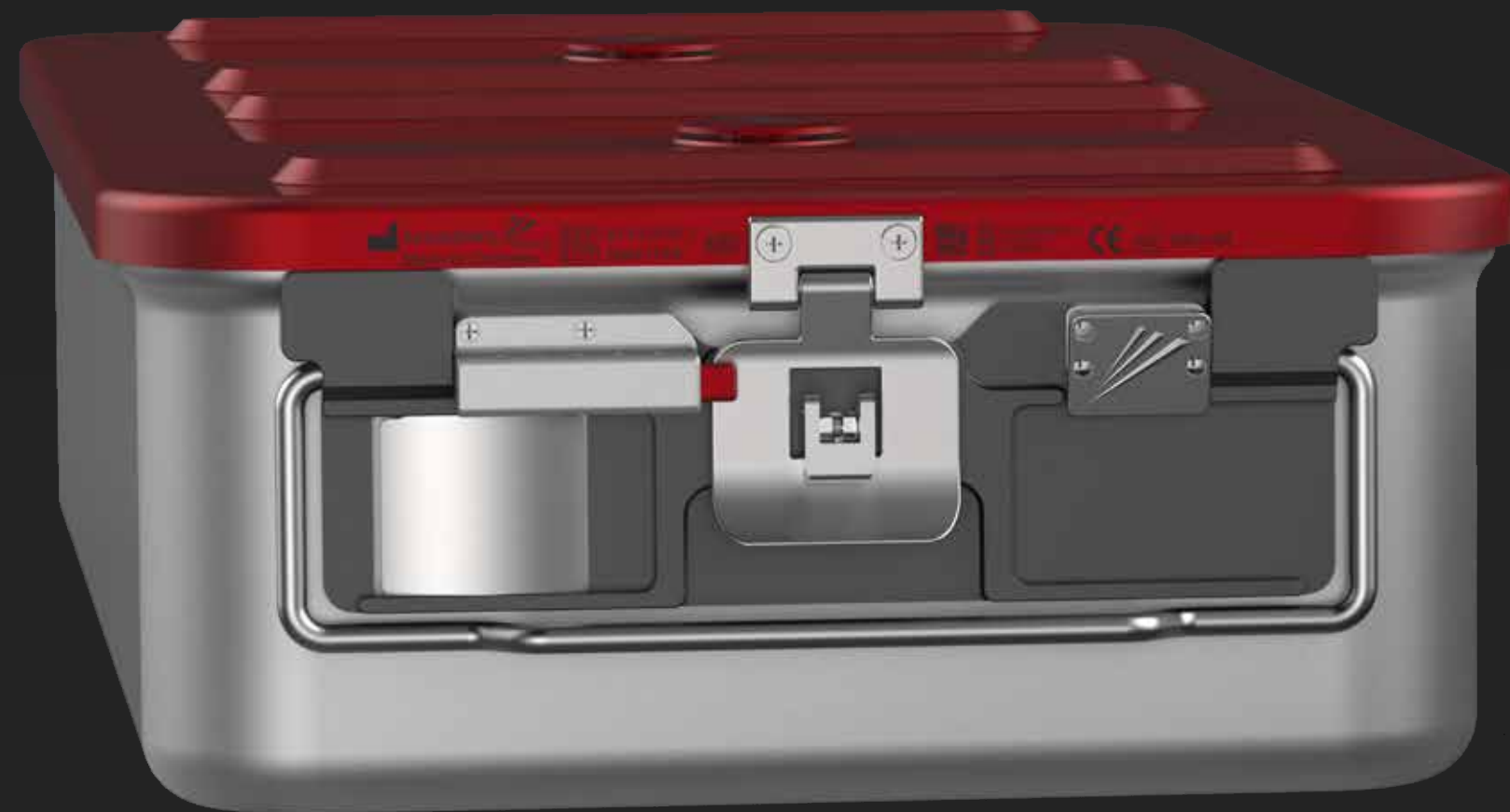


sin Thermolock 10



necesario

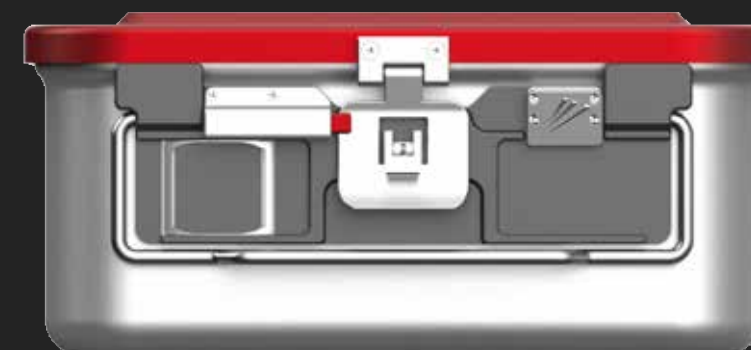

Thermolock opcional 410.47.01.0

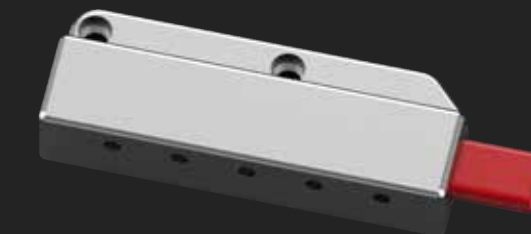

no necesario pero compatible




# accesorios de identificación




sin Thermolock 06




necesario

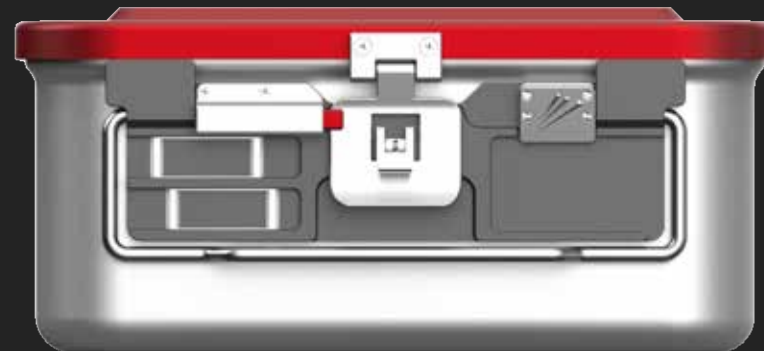


Thermolock opcional 410.47.01.0

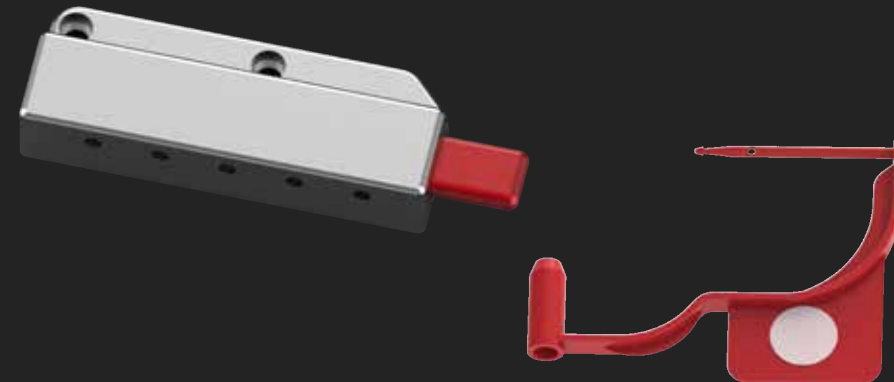

no necesario pero compatible

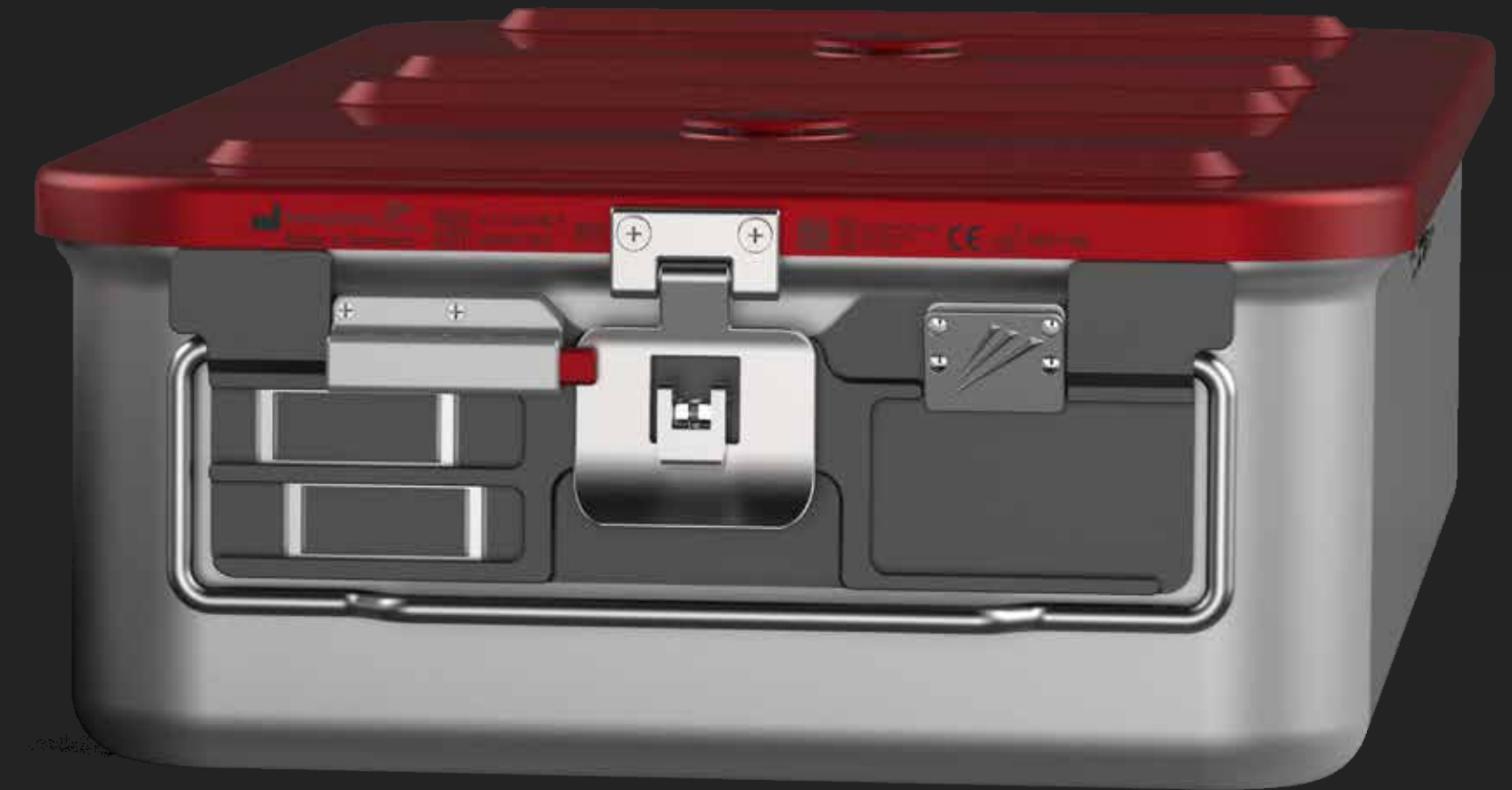

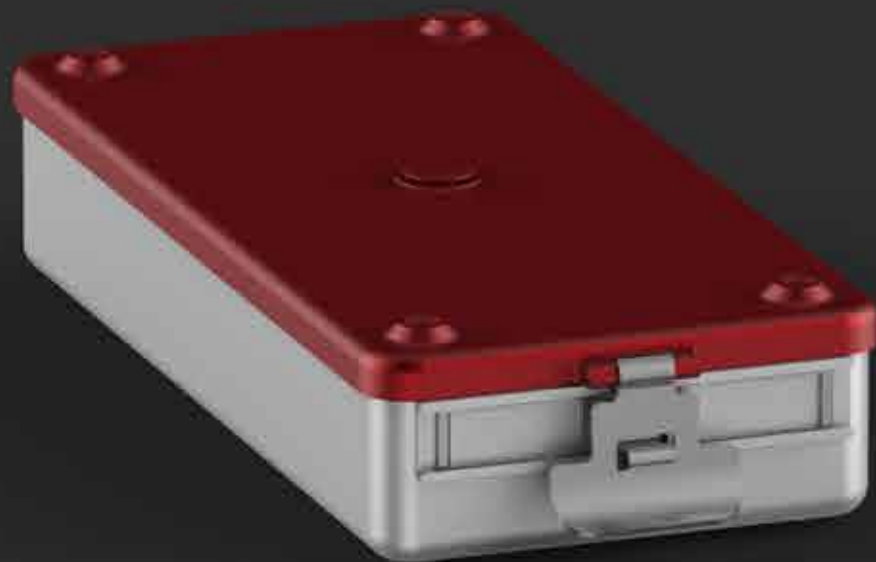

Tapa S

EasyStop

tapa para retiro de la  
mesa quirúrgica  
477.04.01.X


471.03.01.X

roja 1    plata 2    azul 3    verde 4    dorado5    negro6    gris 7

Cubeta

tamaño		dimensiones externas	dimensiones internas [carga máxima alta]	número de artículo
S	47	300 x 135 x 47	279 x 129 x [31]	470.05.04.2
S	62	300 x 135 x 62	279 x 129 x [46]	470.05.06.2
S	71	300 x 135 x 71	279 x 129 x [55]	470.05.07.2



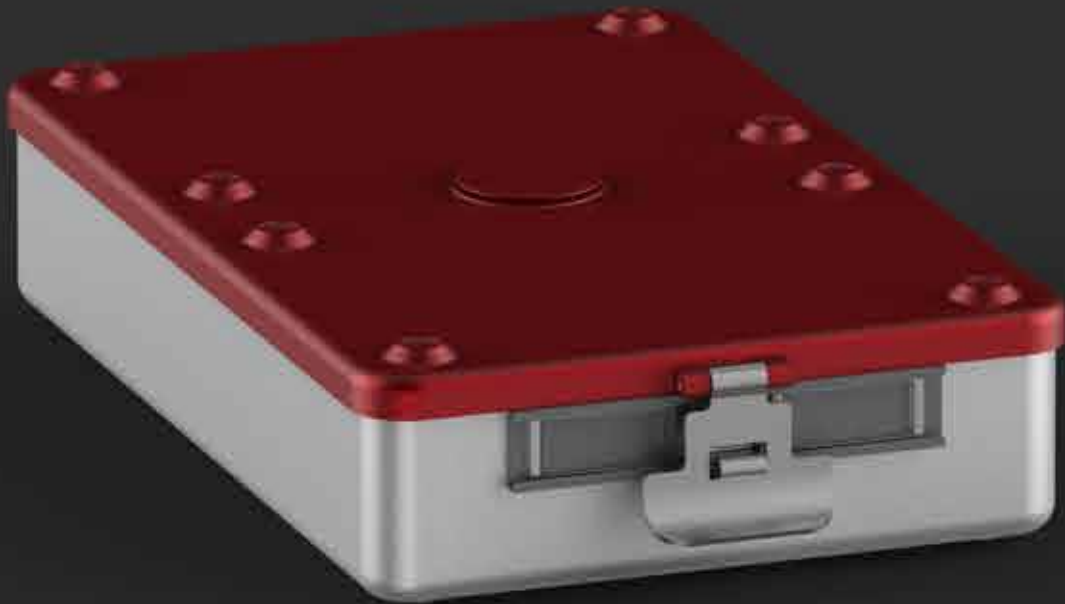

Tapa D

EasyStop

tapa para retiro de la  
mesa quirúrgica

481.03.01.X

487.04.01.X

roja 1    plata 2    azul 3    verde 4    dorado 5    negro 6    gris 7

Cubeta

tamaño		dimensiones externas	dimensiones internas [carga máxima alta]	número de artículo
D	50	310 x 190 x 50	282 x 181 x [34]	480.05.04.2
D	67	310 x 190 x 67	282 x 181 x [51]	480.05.06.2
D	85	310 x 190 x 85	282 x 181 x [69]	480.05.08.2



Tapa D1/2

EasyStop

tapa para retiro de la  
mesa quirúrgica

491.03.01.X

497.04.01.X

roja 1    plata 2    azul 3    verde 4    dorado5    negro6    gris 7


Cubeta

tamaño	dimensiones externas	dimensiones internas [carga máxima alta]	número de artículo
D1/2 50	205 x 145 x 50	181 x 136 x [34]	490.05.04.2
D1/2 67	205 x 145 x 67	181 x 136 x [51]	490.05.06.2



etiquetas de identificación 40x60  
sin grabado  
410.23.00.X


con grabado  
410.13.00.X

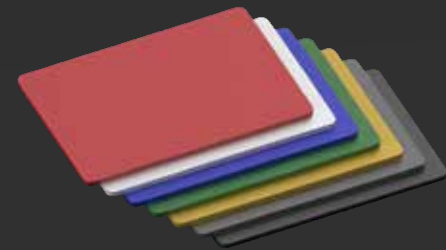

- roja 1
- plata 2
- azul 3
- verde 4
- dorado 5
- negro 6
- gris 7

etiquetas de identificación 18x50  
sin grabado  
410.22.00.X

con grabado  
410.12.00.X

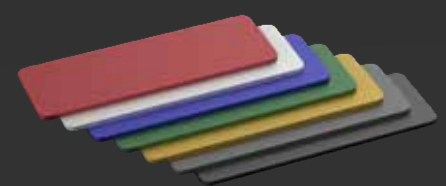

candados de bloqueo de caja

sin indicador [100pcs.] con. indicador [100pcs.]  
410.21.00.1 410.11.00.1



tapetes de silicona



tamaño

XL [440x230] 410.30.00.3	L [380x230] 420.30.00.3	M [220x230] 430.30.00.3	S [270x125] 440.30.00.3	Dental [260x160] 450.30.00.3	1/2 Dental [160x130] 460.30.00.3
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

XL long [540x230]  
410.36.00.3

Termolock opcional

410.47.01.0

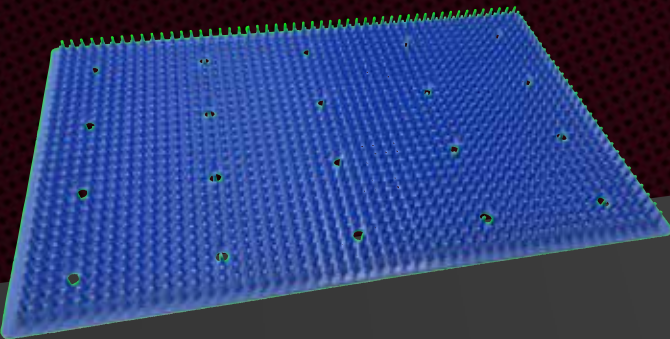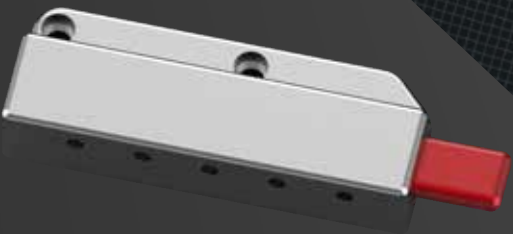





Innovations Medical Badstraße 11, 78532 Tuttlingen

## sustainable Innovations Medical

- Sistema de calefacción de pellets climáticamente neutro
- Sistema fotovoltaico





