



la sicurezza nella sua forma piú bella



**Hard Top Box**

# sicuro e maneggevole

## the Hard Top Box

container di ultima generazione from Innovations medical

design evoluto - ergonomia semplice  
sicurezza e qualità del processo di sterilizzazione

investimento responsabile - valore nel tempo .

test indipendenti confermano funzionalità, sicurezza e qualità.  
Nel ciclo di asciugatura si conferma la superiorità della lega di alluminio

Il container di Innovations Medical supera gli standard richiesti e soddisfa i requisiti del mercato sanitario.




# perfetto nei dettagli

I nostri standard di qualità si riflettono in ogni dettaglio - etichettatura e sistema di sicurezza garantiscono operatori e pazienti.

**investimento** sostenibile che mantiene il suo valore nel tempo

- diverse dimensioni per tutte le esigenze
- alta stabilità fondo/ coperchio
- assenza di manutenzione
- non necessita di consumabili
- alloggiamento della guarnizione stabile e sicuro
- sostituzione della guarnizione semplice

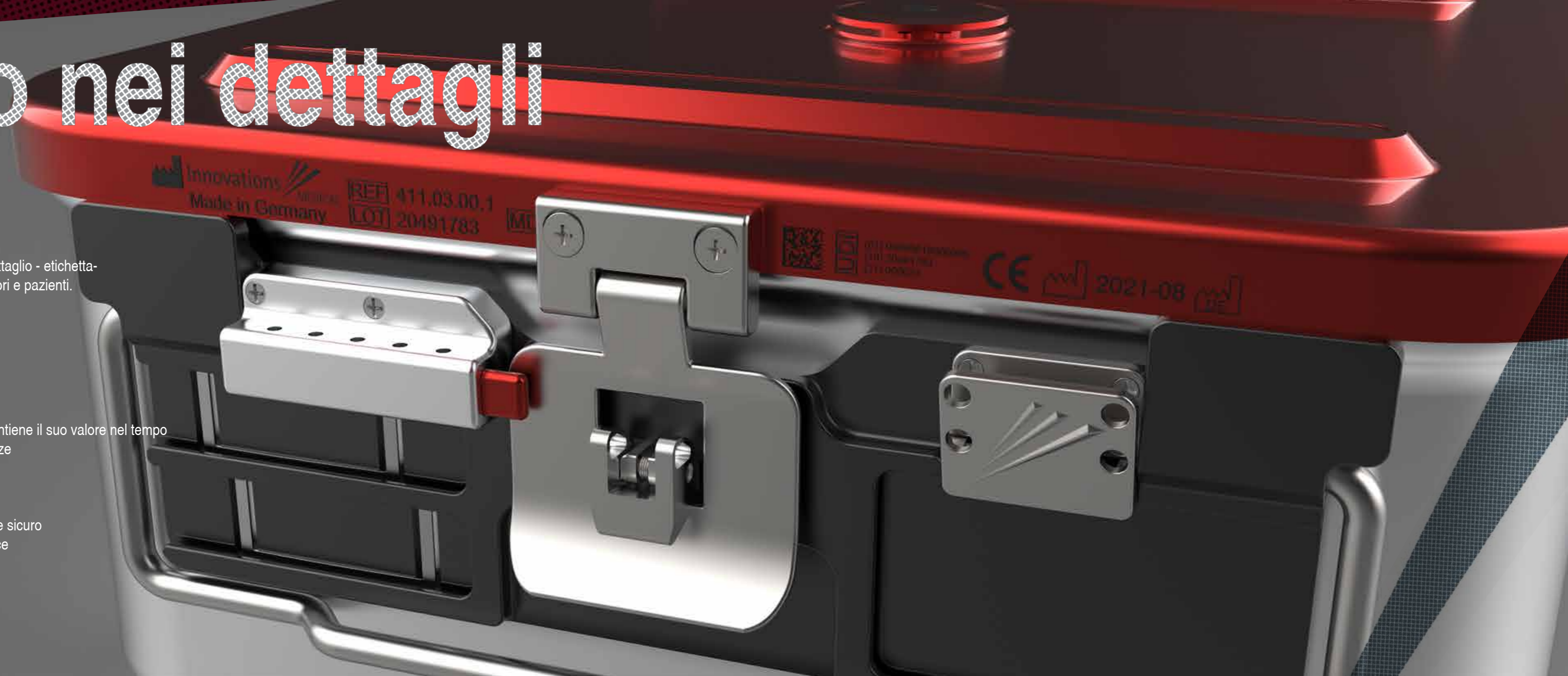

# sicurezza assoluta

## il coperchio

### UNICO !

fresato da un blocco unico di alluminio.  
forma e stabilità - adeguato alle dure esigenze del quotidiano

**ergonomia** avanzata | sovrapposizione | uso rapido e sicuro | privo di spigoli e sporgenze

**riduce** gli accessori | tempo di asciugatura | tempi costi di manutenzione

Innovations   
Made in Germany REF 411.03.00.1  
LOT 20401783 MD

   2021-08

# il fondo





## fondo/ vasca container

- con maniglia di trasporto per carichi pesanti
- senza di raccordi, rivetti e spigoli  
(le innovative connessioni TOX-Clinch rendono superfluo il test di tenuta)
- impilamento sicuro e stabile
- dimensioni interne conformi alle norme
- spessore della vasca ottimale per robustezza e facilità di asciugatura
- ottimale alloggiamento tra fondo, coperchio e guarnizione

# supporti etichette

# identificazione

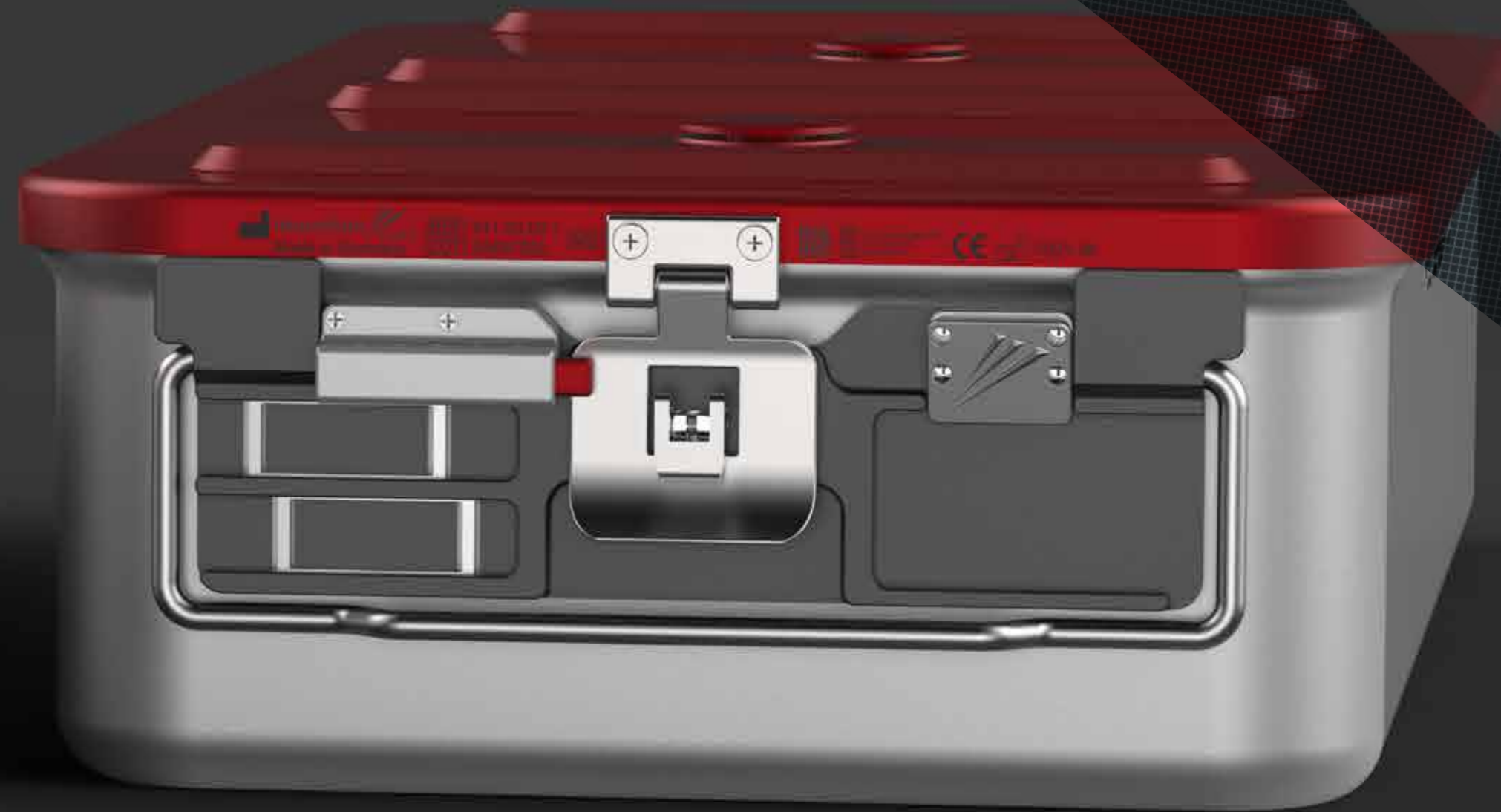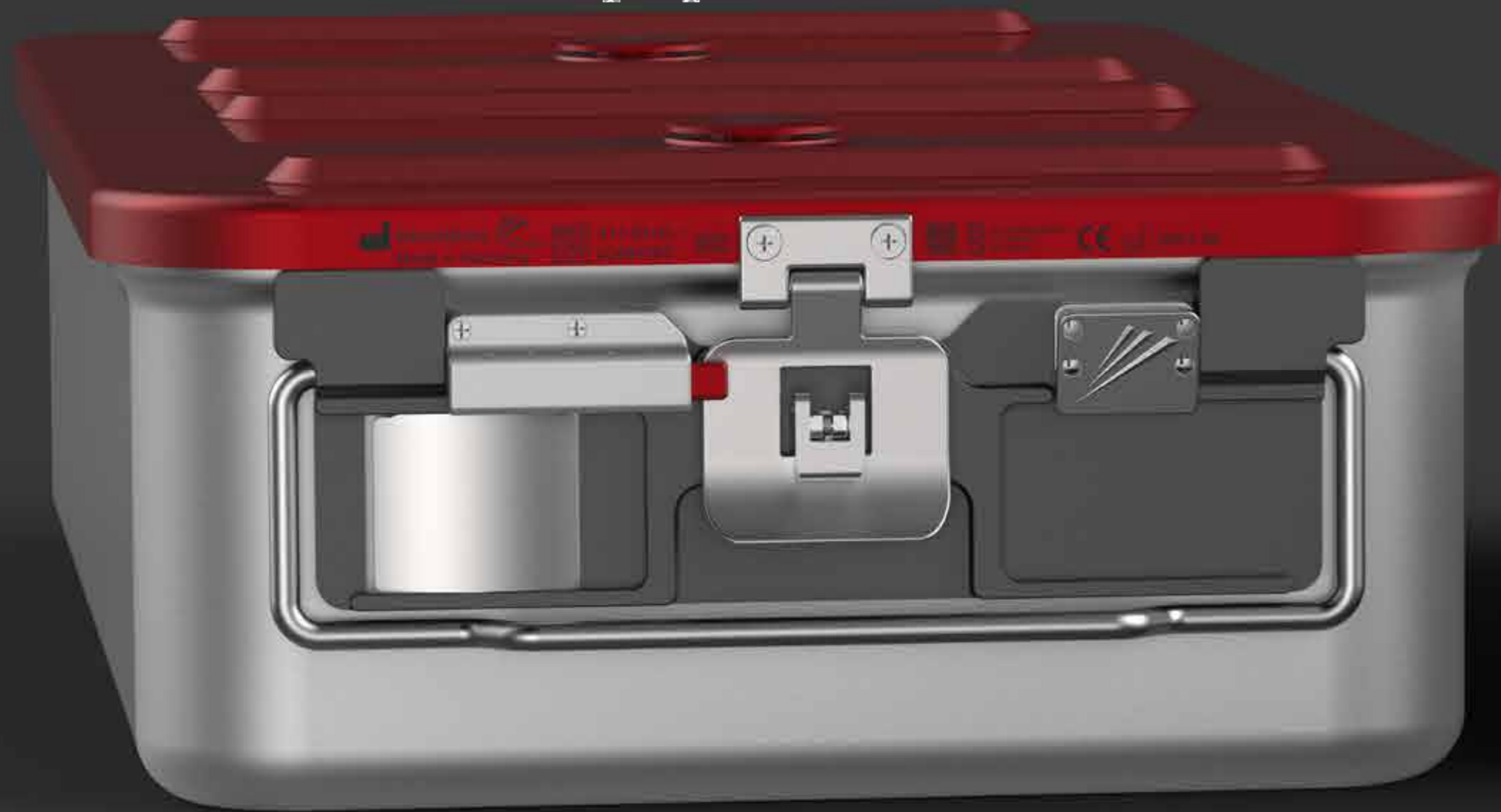

supporti etichette personalizzabili.

il container Innovations Medical si adatta alle vostre esigenze dimensioni, identificazione e sistema di filtraggio.

# EasyStop

ingegnosamente semplice e  
semplicemente geniale



la sicurezza passa per l'innovazione

## EasyStop

EasyStop sistema senza consumabili.

Il sistema EasyStop di Innovations Medical risponde alle crescenti esigenze di sterilità, protezione ambientale e praticità di utilizzo.

EasyStop blocca i microorganismi in modo più efficace dei filtri convenzionali.

L'efficienza di filtrazione è del 99,997 %

Ispezione e controllo del sistema filtrante sono facili e intuitivi.




il sistema „labirinto“ blocca microbi, germi e particelle il materiale sterile rimane protetto a garanzia della sicurezza del paziente.

# sistemi filtro

sistema filtro monouso  
sistema filtro permanente PTFE

sicurezza del supporto filtro

grande attenzione è stata riservata al supporto filtri.  
Ulteriori anelli di tenuta sul coperchio garantiscono un livello di tenuta assolutamente unico.

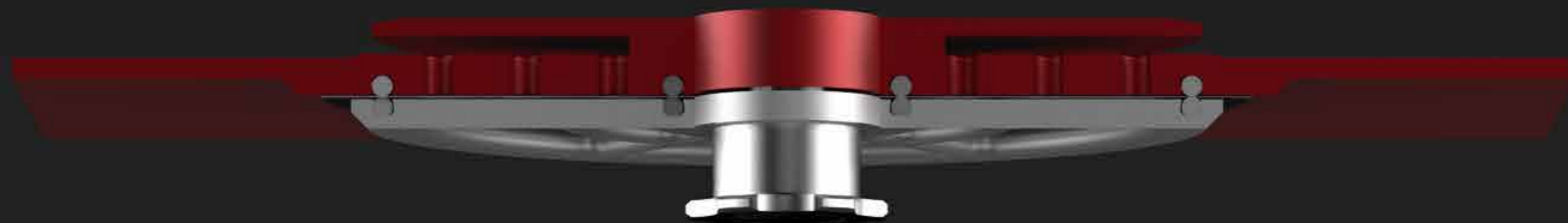

collaudato e ottimizzato

Innovations Medical ha migliorato e ottimizzato il sistema con filtri sostituibili.  
Un pratico e sicuro meccanismo tiene in sede il filtro.  
Un pratico sistema di controllo visivo permette di verificare lo stato di chiusura del meccanismo.



# sistema filtri monouso

## sistema filtri monouso

- adatto a container dotati di supporto filtro monouso
- il filtro viene sostituito ad ogni circolo



# sistema filtro permanente



## sistema filtro permanente

- adatto a container dotati di supporto per filtro PTFE
- la durata del filtro PTFE è di 1200 cicli
- lunga durata e resistenza agli agenti chimici



MD



UDR

sistema di controllo visivo del corretto alloggiamento del sistema filtro.

sigillato con sistema lucchetto monoblocco

sicurezza controllo del sistema filtro | codici colore | portaetichette personalizzabili | superfici senza spigoli | conformità alle norme

Innovations  
Made in Germany  
410.05.13.2-18.00  
20571361  
CE

# colori


speciale


processo di anodizzazione PH resistente

# traccie di identificazione

colori vasta gamma di scelta

traccia possibilità illimitate di colore, testo e codice

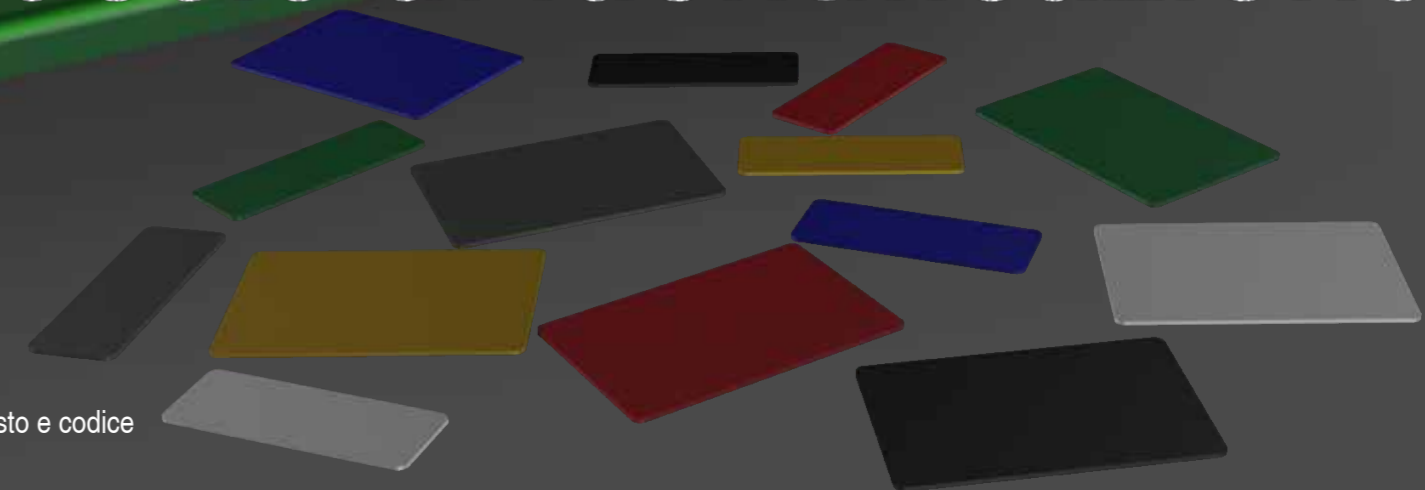

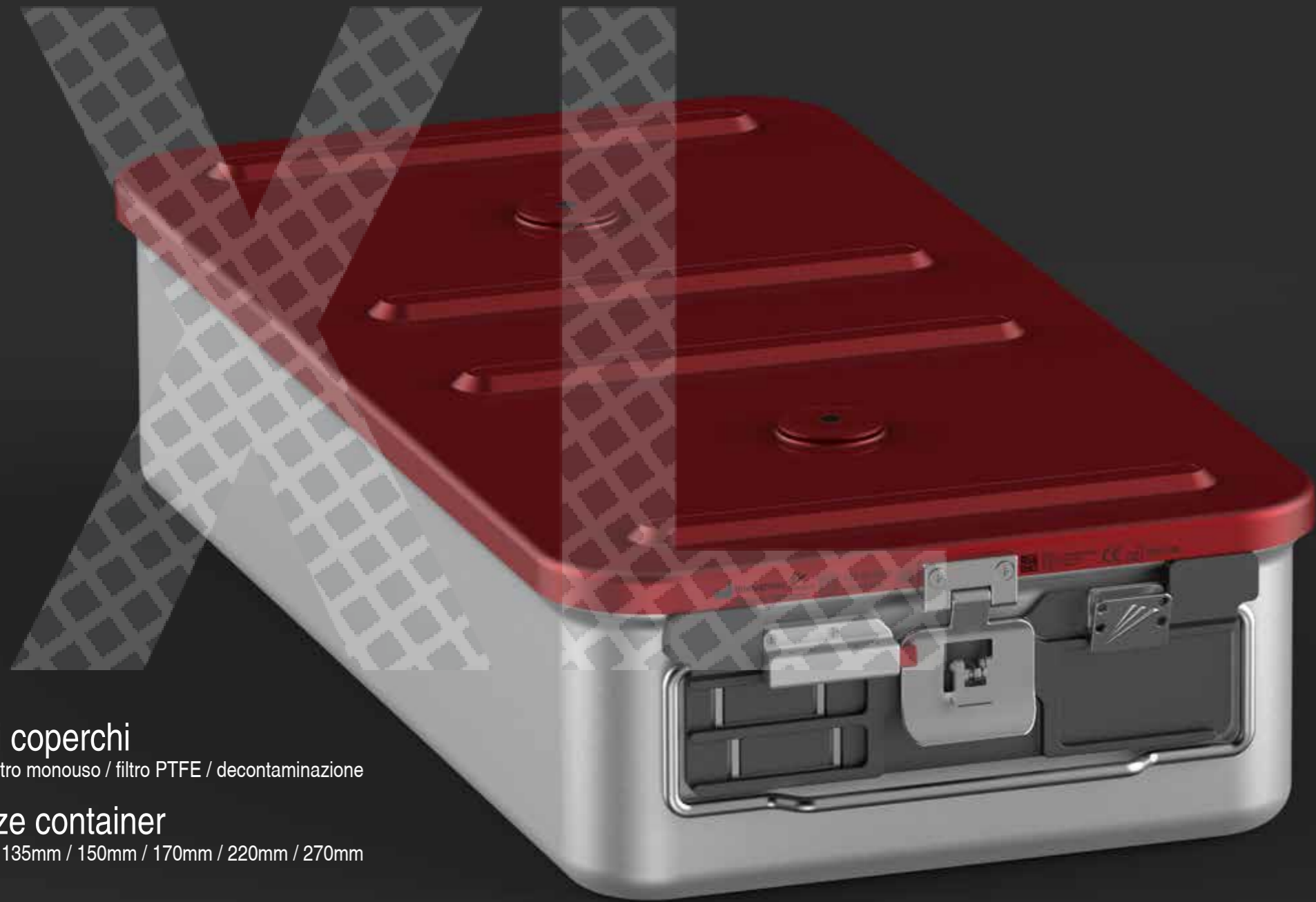


### Varianti coperchi

EasyStop / filtro monouso / filtro PTFE / decontaminazione

### altezze container

100mm / 135mm / 150mm / 170mm / 220mm / 270mm

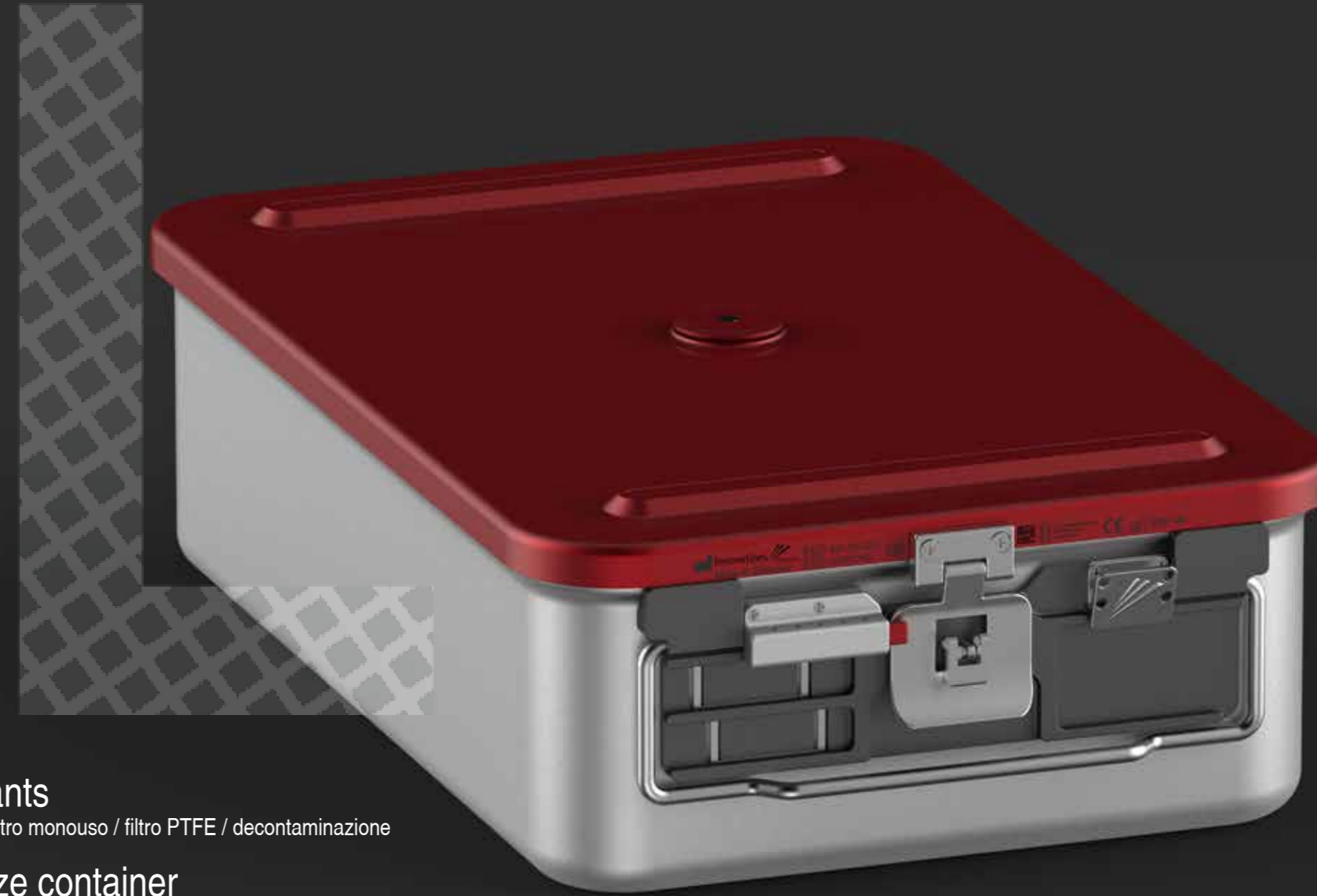


### lid variants

EasyStop / filtro monouso / filtro PTFE / decontaminazione

### altezze container

100mm / 135mm / 150mm

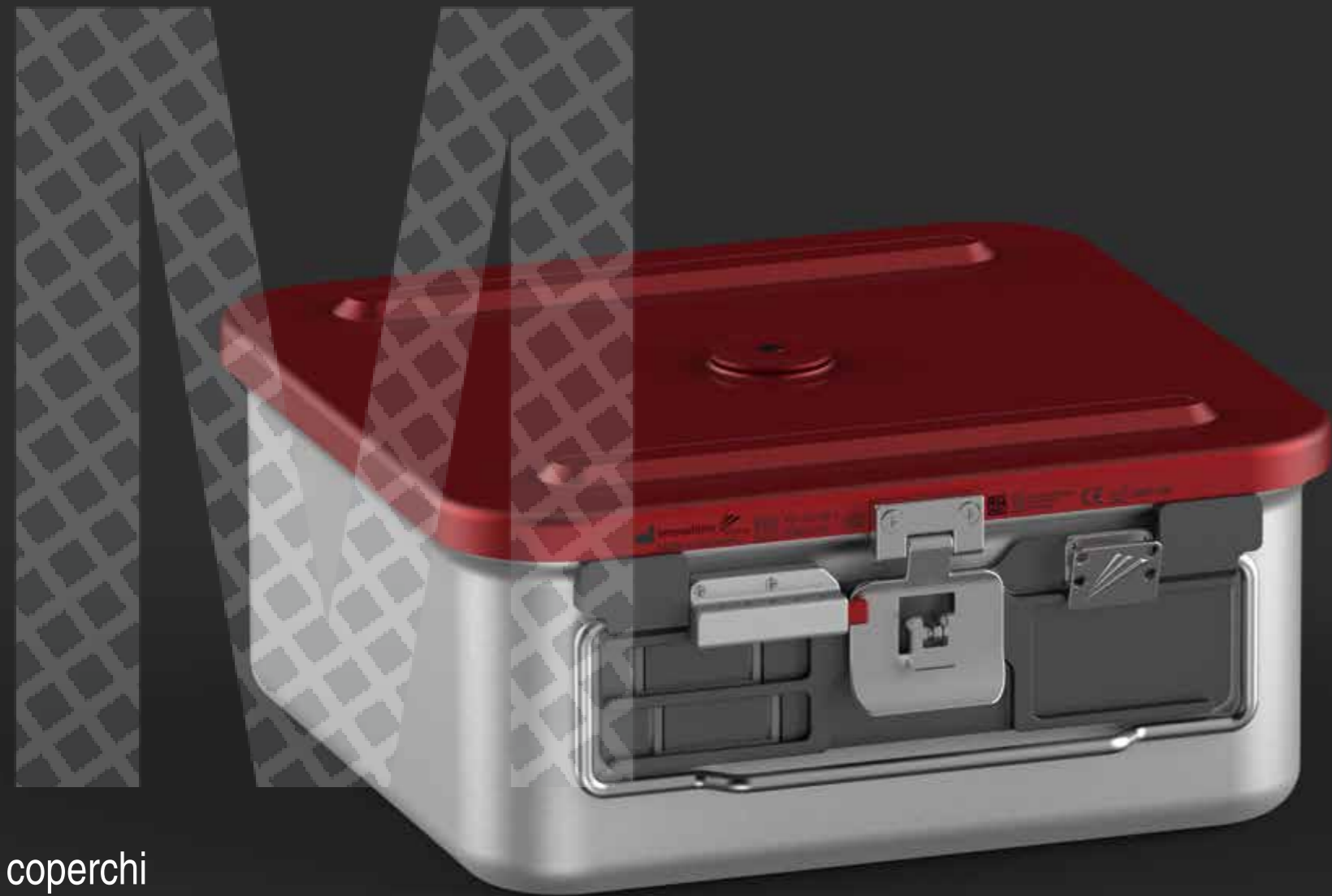

### varianti coperchi

EasyStop / filtro monouso / filtro PTFE / decontaminazione

### altezze container

100mm / 135mm / 150mm / 170mm / 220mm / 270mm




### varianti coperchi

EasyStop / decontaminazione


### altezze container heights

47mm / 62mm / 71mm

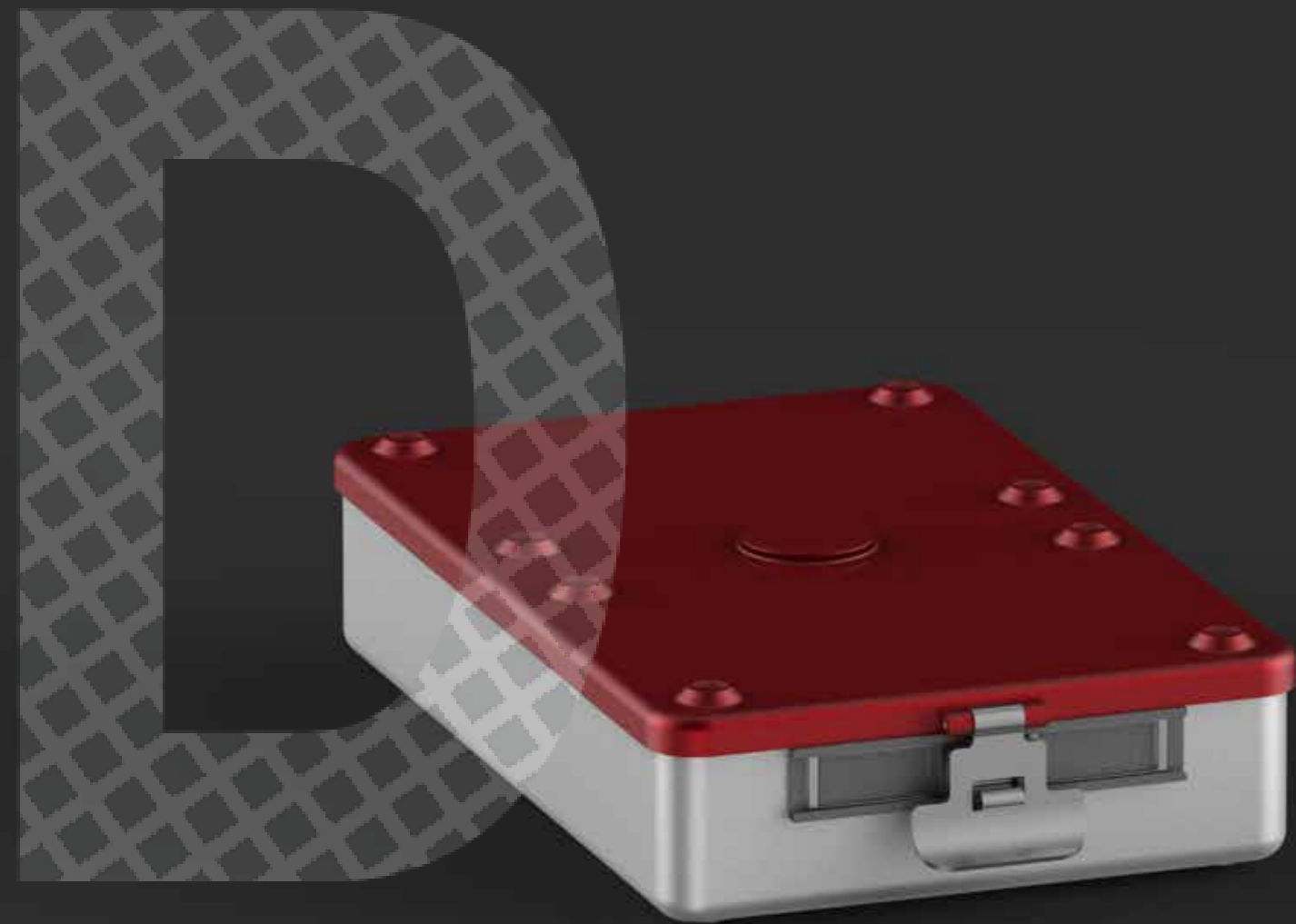

**varianti coperchi**  
EasyStop / decontaminazione

**altezze container heights**  
50mm / 67mm / 85mm

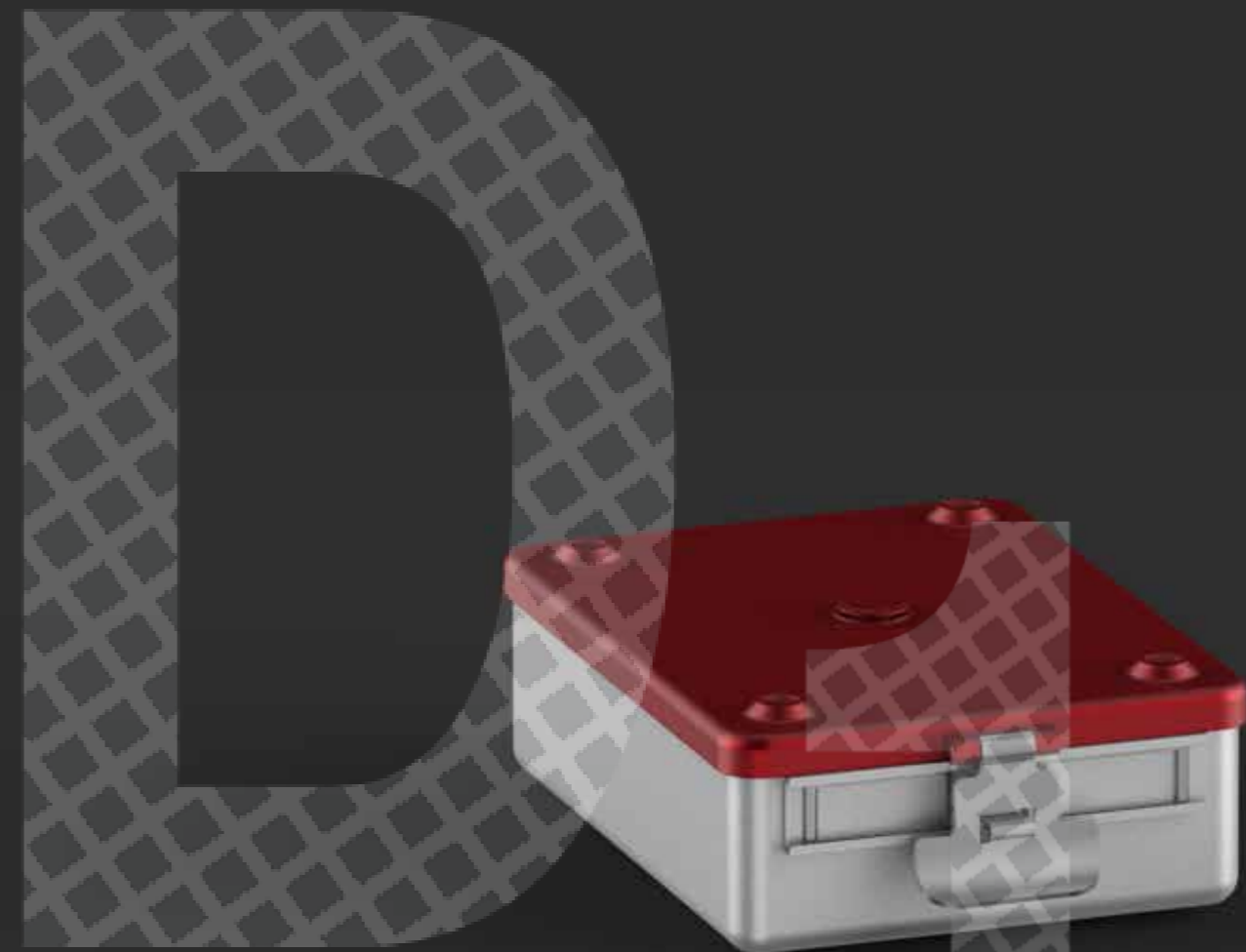

**varianti coperchi**  
EasyStop / decontaminazione

**altezze container**  
50mm / 67mm





Innovations Medical Badstraße 11, 78532 Tuttlingen



sustainable Innovations Medical

- Climate-neutral pellet heating system
- photovoltaic system





14.0105.00

Innovations Medical GmbH  
Badstraße 11, 78532 Tuttlingen, Germany  
Phone: +49 74 61 / 9 66 42 - 0  
Fax: +49 74 61 / 9 66 42 - 82  
Mail: [info@innovations-medical.de](mailto:info@innovations-medical.de)  
Web: [www.innovations-medical.de](http://www.innovations-medical.de)